




# カリク

赤外線フェイシャルマスク



## カリク赤外線 フェイシャルマスク

皮膚の健康と  
革新的な美しさ  
赤外線技術

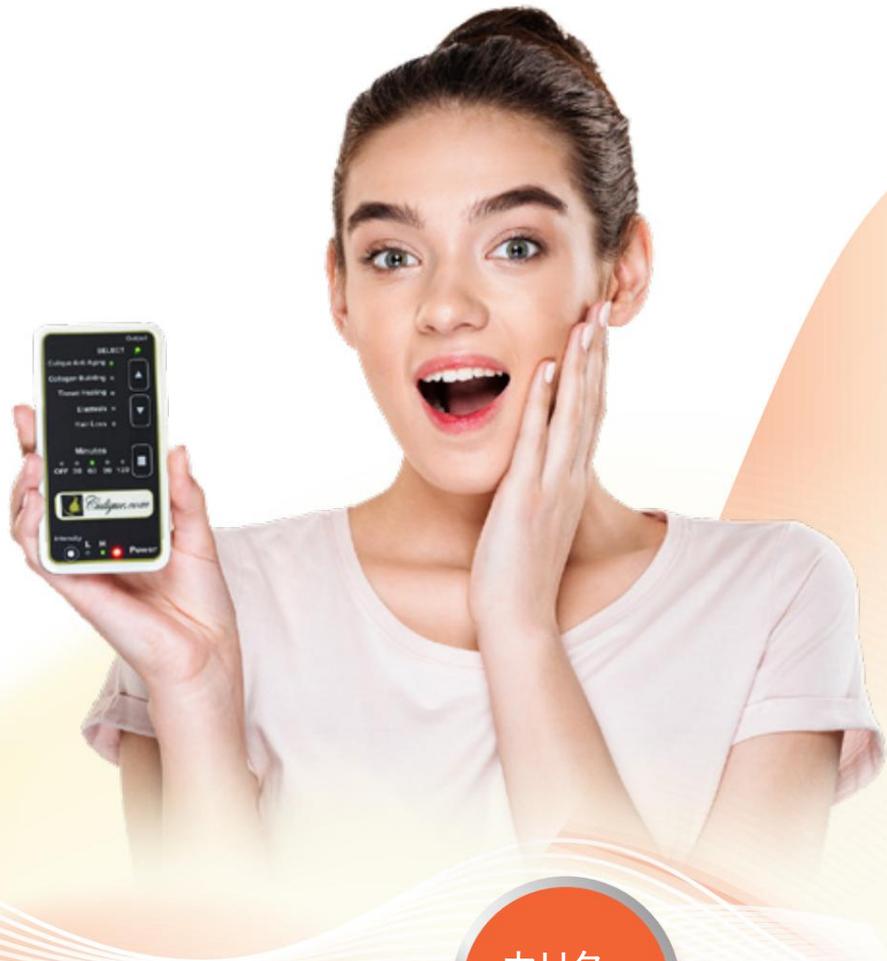

カリク  
コントローラ

キュリックマスク

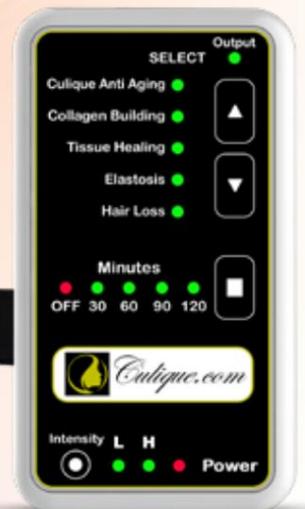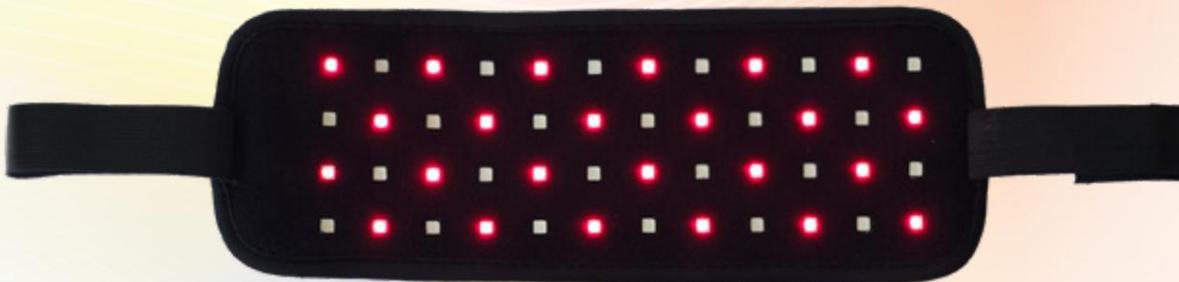

命令  
本

英語



[www.culique.com](http://www.culique.com)

# 索引

について	
キュリックスキントリートメントデバイス	03
何ですか	
赤外線療法	04
製品説明	
利点; コンポーネント	05
技術的説明	
クリック赤外線スキンマスク	06
接続方法	
クリック赤外線スキンマスク	07
着用方法	
クリック赤外線スキンマスク	07
ユーザーテクニック	
Culique赤外線スキンマスクの着用	08
推奨タイミング	
治療について	08
推奨強度設定	
治療について	08
コントローラー機能	
クリックコントローラー	09
2人の人をつなぐ	
Culiqueコントローラーへ	10


高度な機械接続	
RDPV4に4人を接続する	11
どのように機能しますか?	
肌の悩み	12
アンチエイジング	13
コラーゲン生成	14
組織の治癒	15
弾性線維症	16
脱毛	17
よくある質問	
よくある質問	18
保証と免責事項	20
ETDFLについて	21



## について

# キュリックスキントリートメントデバイス

ロイヤル・ライフ博士は医学史における記念碑的な人物であり、先駆的な発明と革新的な治療法で高く評価されています。光と音の周波数の力を活用するという彼の画期的な研究は、医療に永続的な影響を与え、イノベーションと健康の溝を埋める技術を生み出してきました。

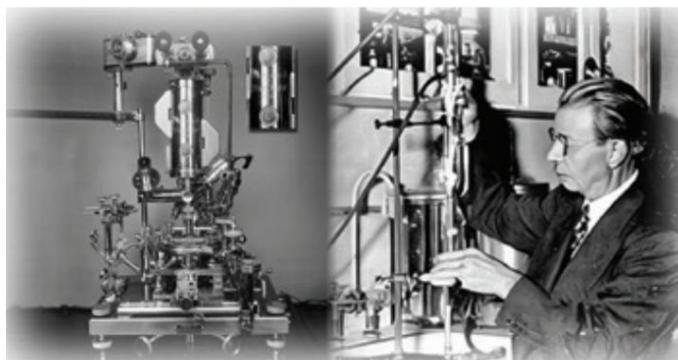

ライフ博士の功績の中核は、音の周波数を巧みに生成し、それを光源に送信するライフ・マシンの発明です。この光と音の革新的な融合は、ライフ博士の治療法研究の基盤となり、周波数療法の治癒力を明らかにしました。

ライフ博士は医学の進歩にたゆまぬ努力を注ぎ、緻密な工学と実験に取り組みました。彼は光療法と音の周波数を融合させることでその治療効果を解き放ち、様々な疾患に対する新たな治療法の時代を切り開きました。彼の画期的な実験は、現代医学に影響を与え続ける先進技術の基盤を築きました。

ライフ博士の注目すべき発明の一つに、光と周波数技術を効果的に組み合わせた初期のプロトタイプであるビームレイがあります。この革新的な装置は、光線療法の可能性を示しただけでなく、現代の医療機器開発の青写真ともなりました。

今日、Culique赤外線スキントリートメントマスクは、これらの基礎技術をシームレスに統合することで、ライフ博士の理念を体現しています。ライフ博士はCuliqueマスクを発明したわけではありませんが、そのデザインは、音波を光波に変換するというライフ博士の画期的な手法を活用し、ターゲットを絞ったスキンケアソリューションを提供します。特定の光周波数を用いることで、Culiqueマスクは細胞の若返りを促進し、肌の質感を改善し、肌の健康全体をサポートします。これは、ライフ博士の「周波数による治癒」というビジョンを反映しています。

クリクマスクは、ライフ博士の遺産にインスピレーションを得た数十年にわたる研究と革新の集大成です。光と音を治療に組み合わせることによってもたらされる変革の力を証明するものであり、スキンケアと医学の世界に待ち受ける無限の可能性を私たちに思い起こさせてくれます。

ライフ博士の先駆的な技術を融合させたキュリック赤外線スキントリートメントマスクは、豊かなイノベーションの歴史を活かし、効果的で若返り効果のあるトリートメントを提供する、現代的なスキンケアアプローチを提供します。ライフ博士の遺志を継ぐキュリックマスクは、科学の進歩に根ざしたウェルネスへのコミットメントを反映し、スキンケアの可能性の限界を押し広げ続けています。

## 赤外線光線療法とは何ですか？


Culique マスクは、5つの異なる周波数グループにわたって集中した深部浸透波長を採用し、キロヘルツ (kHz) 単位で 50 を超える独自の周波数を生成します。

これらのkHzの音波周波数は、赤外線LEDアレイを通して光周波数に変換されます。この高度な治療法は、細胞の修復を促進し、血行を改善することで、肌の若返りと健康増進を目的として設計されており、有害な紫外線を除去しながら、自然光の効果を効果的に再現します。

### Culique コントローラー

Culiqueコントローラーは、Culique赤外線フェイシャルマスクを簡単に操作できるように設計された、直感的で使いやすいデバイスです。コントローラーは

特定の帯域幅にわたって周波数を送信し、マスク上の各可視光と不可視光に出力します。

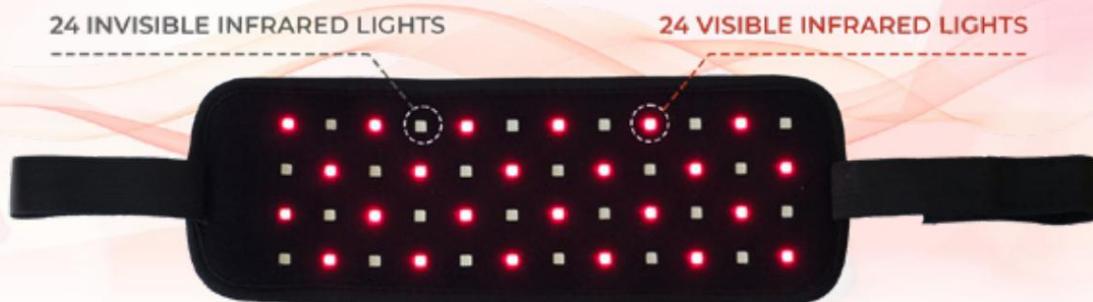

#### 5つの治療モード

アンチエイジング、コラーゲン生成、  
皮膚組織の治癒、弾性線維症、  
脱毛。

#### ハンズフリー

使いやすく、着心地が良い

#### FDA承認済み

このデバイスはFDAの承認を受けており、  
自宅で快適にプロ級の赤外線光療法を  
提供します

#### 調節可能なストラップ付き

Culiqueマスクには調節可能なベルクロストラップが付属しており、  
ユニバーサルフィットでデバイスを確実に  
すべてのユーザーにとって快適かつ  
安全に肌にフィットします

## カリク 赤外線 フェイシャルマスク

自宅で快適にプロ仕様の赤外線光療法を体験  
し、目に見える効果を実感してください。



### カリクコントローラー

#### 自動タイマー

自動タイマーは30、60、90を許可します  
120分

#### 調整可能な強度

調整可能な強度

ボタンを押すだけで低強度から高強度に切り替  
えられます  
ボタン

#### 48個のプログラム可能な赤外線LED

Culiqueの48個のLEDのそれぞれ  
マスクは、特定の肌の状態に対応するために調  
整された特別な周波数プログラムで動作しま  
す。  
効果的な治療を促進する  
それらの問題。

## 製品説明

この強力なFDA承認済みの光療法装置は、顔全体に設計されており、

24個の可視赤外線LEDライト発光ダイオード

可視モードと24個の不可視赤外線発光ダイオードが連携してコラーゲン生成を促進し、肌の密度を高め、しわを滑らかにし、変色を減らし、肌を明るくします。

ニキビを予防し、透明感のある若々しい肌を実現します。

すべての肌タイプに。



## 利点

• シワや小じわを滑らかにします

可視赤外線は肌の真皮の奥深くまで浸透し、コラーゲンの生成を促進し、小じわやシワを滑らかにします。97%が全体的に

10 週間後、小じわ、シワ、肌の色合いが改善されました。

• 肌を明るくする

目に見えない赤外線がニキビの原因となる細

菌を破壊し、軽度から中程度のニキビを治します。可視赤外線

光は肌の色合いと質感を均一にし、ニキビの再発を防ぎます。2 週間後、97%の方にニキビの全体的な改善が見られました。

• 肌を引き締め、肌の密度を高めます

可視赤外線が肌に浸透し、天然コラーゲンをサポートして目に見えて肌を引き締めます。

• 日焼けによるダメージの兆候を治療します

可視赤外線赤色光は、日焼けによるシミ、加齢によるシミ、変色を軽減する働きがあります。

• 脱毛

特別な脱毛プログラムを使用すると、マスクは髪の毛の再生にも使用できます。

## コンポーネント

主要コンポーネント

• 24個の可視赤外線発光ダイオードが肌の真皮深部に浸透し、コラーゲンの生成を促進します。各LEDは、選択されたプログラムに応じて特定のKHz周波数帯域で駆動されます。

• 24個の目に見えない赤外線発光ダイオードがアクネ菌を殺菌し、赤みや炎症を抑え、将来のニキビの発生を防ぎます。各LEDは、選択されたプログラムに応じて特定のKHz周波数帯域で動作します。

# 技術的説明

## クリク赤外線スキンマスク

### 周波数範囲

0:01 Hz - 50 MHz でテスト済み

### 周波数波と側波帯

RDPV4マシンに接続すると、複数の赤外線スペクトルを使用してすべてのETDFL周波数を送信します。すべてのDr Rife MORキャリア波とRF

周波数はマスクの正極領域と接地領域を通じて +99%+ の効率で再現されます。

### Culique マスクを Culique コントローラーと併用する場合の明るさ設定

施術を開始するには、Culique コントローラーを LOW 照明レベルに設定します。

しばらく経ったら、より効果的なスキんケアプロトコルのためにHIGHに切り替えることができます。Culique マスクを使用する際は、マルチモード赤外線プラスの周波数が両方の肌に届くように、肌を開いた状態にしてください。光が強すぎると感じた場合は、コントローラーをLOWに戻してください。

### RDPV4コントローラーでCuliqueマスクを使用する場合の明るさ設定

- 照射レベルが強すぎる場合は、RDPV4の電圧レベルを12.5V DCに設定してください。12.5V DCは最低照射レベルです。中間設定は14.5V、デフォルトの最高レベルは17.5Vで、スキントリートメントに推奨されます。
- マルチモード赤外線プラスの周波数は両方の肌に届く必要があるため、キュリクマスクを使用する際は必ず肌を開いた状態にしてください。光が強すぎると感じた場合は、コントローラーをLOW設定に戻してください。

### クリニックの使用と清掃

マスクを複数人で使用する場合、またはクリニックで使用する場合は、使用後に布で表面を拭いてください。表面に直接アルコールを塗布しないでください。電子部品が損傷する可能性があるため、洗濯機で洗うことはできません。



## 接続方法


### Culique赤外線スキンマスクのコントローラー



電源ケーブル (1)を使用してコントローラーを電源に接続し、USB-Cケーブル (2)を使用してコントローラーをCulique赤外線スキンマスクに接続します。


## 着こなし方

### クリク赤外線スキンマスク

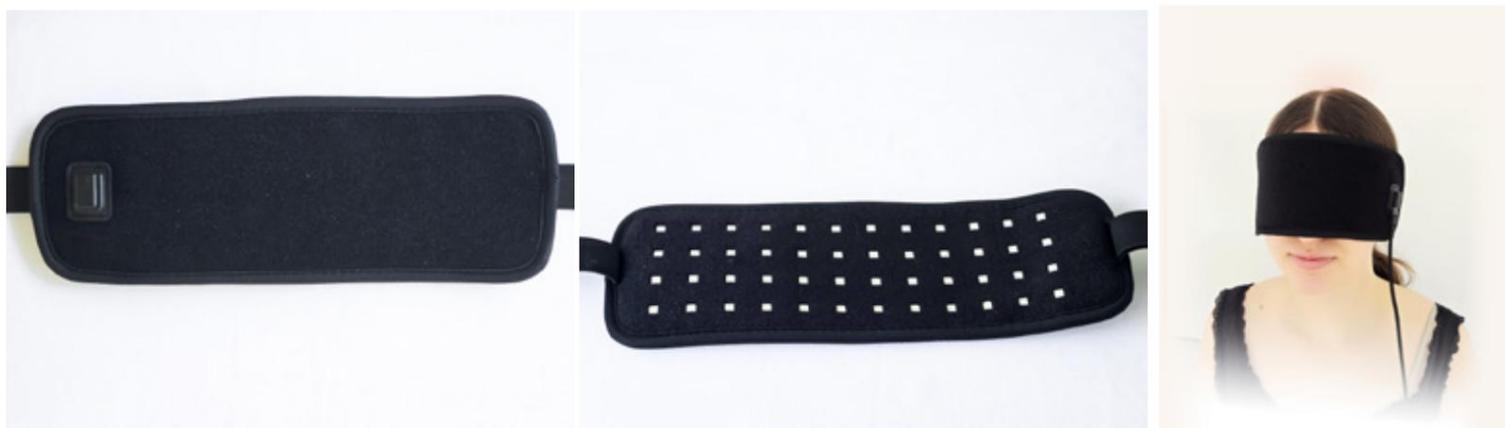

24 INVISIBLE INFRARED LIGHTS

24 VISIBLE INFRARED LIGHTS

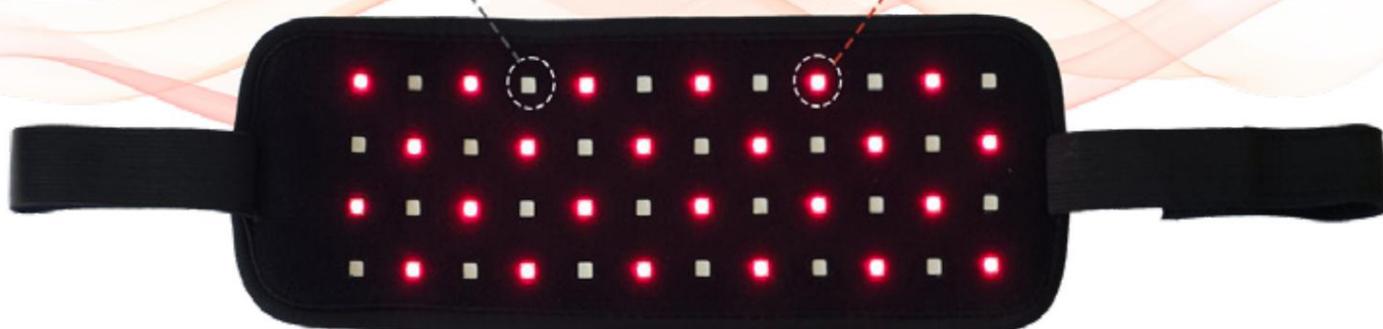

## ユーザーテクニク

Culique赤外線スキンマスクの着用



- コントローラーを電源とCulique赤外線スキンマスクに接続します。
  - コントローラーのLED電源インジケータを確認します。
  - マスクの赤外線ライトを確認します。
  - 希望するモードとタイミングを選択します。
- Culique赤外線スキンマスクを装着します（上記参照）。
- 注意 :肌面に面した24個のライトは目に見えません。

しかし、それらはオンになっていて、人間の皮膚には見えない周波数で光を送信しています。

## 推奨タイミング

治療について

- 選択肢: 30、60、90、120 分
- 最短 30 分の治療。
- 最長 120 分の治療時間。

## 推奨強度設定


治療について

- 低強度設定から始めてください。
- より重篤な皮膚疾患の場合は高強度設定ですが、不快感がある場合は低強度設定に戻してください。
- 治療は集中的に行われるため、治療中は皮膚が開いている必要があります。

実際のスキンケアについて

# コントローラー機能

## クリックコントローラー

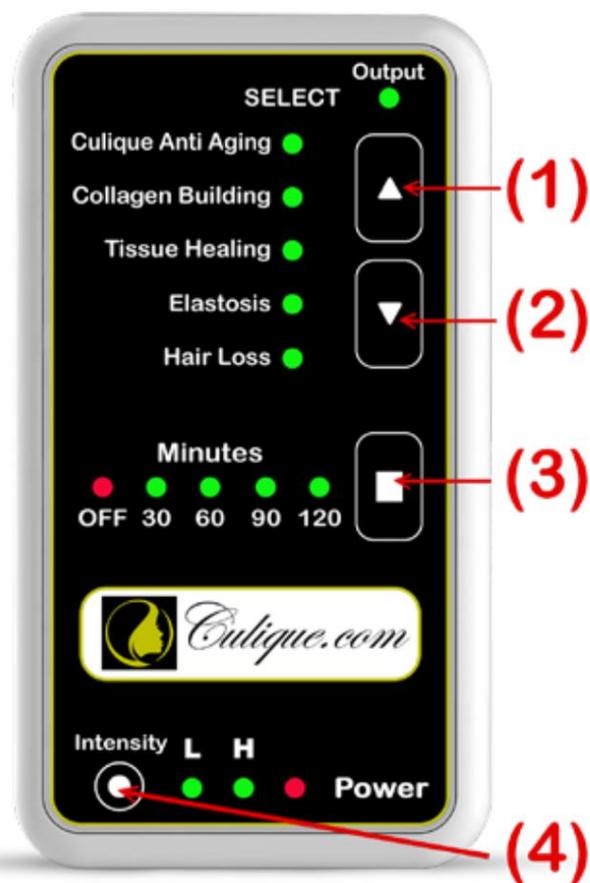

クリックコントローラー

(1)ボタン1: 上  
上矢印を使用して上に移動します皮膚障害  
カテゴリー1~5

(2)ボタン2 :下  
下矢印を使用して下に移動します皮膚疾患  
カテゴリー1~5

(3)ボタン3 :時間調整  
使用方法 治療時間を切り替えるには  
OFF = マスクへの出力なし  
30分、60分、90分、120分

(4)ボタン4: パワー強度  
L = 低出力赤外線出力  
H = 高出力赤外線出力

**Output**  
● 出力LEDオン:コントローラは送信中です  
Culique赤外線への周波数信号出力  
スキンマット

**Power** ● 電源LEDオン:コントローラーは  
電源 (電源アダプタ)に接続

### \* コントローラーポート側面図



コントローラーポート



カリクマスク

- (1) Culique赤外線スキンマスク1個用のUSBポート
- (2) 2つ目のCulique赤外線スキンマスク用のUSBポート
- (3)電源ポート (電源入力)



USB-C


# 2人の人をつなぐ

## Retyneコントローラーへ



コントローラーを使って2人で2つのCulique赤外線マスクを使用する

- コントローラーを電源に接続します。 • 2つのUSB-C 出力ポートを使用して、コントローラーを 2 つの Culique 赤外線マスクに接続します。
- コントローラーのLED電源インジケータと赤外線LEDを確認してください。  
両方のマスクのライトが点灯します。
- 希望するモードとタイミングを選択します（両方のCulique赤外線マスクはコントローラーで同じモードとタイミング設定を使用します）。
- Culique 赤外線スキンマスクを着用してください。

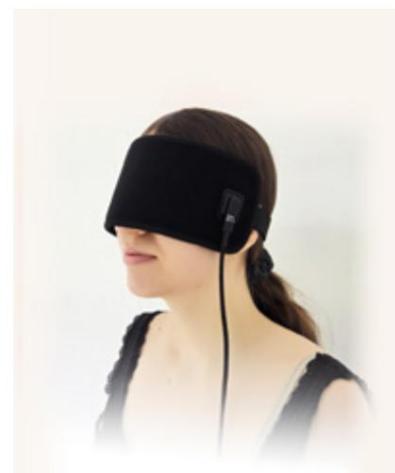

## 高度な機械接続

### 4人を（オプションの）RDPV4に接続



ライフデジタルプロフェッショナルV4（RDPV4）

付属のCuliqueコントローラーは、様々な皮膚疾患に対応する幅広い一般皮膚治療周波数を提供します。ただし、Rife Machine RDPV4をお持ちの方は、「高度なETDFLプログラムメニュー」を選択することで、より具体的なグループにアクセスできます。

#### 1. 特定のグループへのアクセス:

メニュー設定に移動する、または検索バーを使用して、治療したい皮膚疾患に対応する特定の「グループ」番号を見つけます。

#### 2. デバイスの接続:

Culique USBCケーブルをRDPV4本体の上部に差し込みます。Culique赤外線スキンマスクが本体にしっかりと接続されていることを確認してください。

#### 3. RDPV4 CULIQUE メニューの使用:

RDPV4でCulique Light Maskメニューを選択し、指示に従ってください。

画面

#### 4. RDPV4グループメニューの使用:

ETDFL グループ メニューから任意のプログラム番号を選択し、Culique マスクが接続されている間にそのグループをスイープします。

#### 5. 出力設定の調整:

治療効果を最適化するために、RDPV4 を Culique 赤外線スキンマスクに接続しているときは、最高電圧設定に設定してください。

これらの手順により、Culique 赤外線スキンマスクと Rife マシン RDPV4 間の高度な接続が可能になり、さまざまな皮膚の状態に対する正確で強化された治療が可能になります。

## どのように機能しますか？

### 1. ターゲットの老化

これらで使用される10の特定の光の波長マスクはさまざまな肌の悩みにアプローチし、コラーゲンの生成と肌の弾力性の向上、小じわやシワを目立たなくするのに役立ちます。療法は細胞のターンオーバーを刺激し、より明るく、より均一な肌のトーンに。定期的を使用するとより輝きのある若々しい肌へと導きます。戦闘において便利で効果的なツールとなる老化防止に。

### 2. コラーゲンの生成


標的赤外線光療法は、コラーゲンの生成、肌の弾力性の向上、小じわやシワを目立たなくします。肌のさまざまな深さに浸透する、カリクマスク細胞の再生を促進し、全体的な改善を図る肌の色調と質感を整えます。定期的を使用することで、より若々しく輝く肌を実現し、あらゆるスキンケア ルーチンに効果的に追加できます。

### 3. 皮膚組織の治癒とニキビ

LEDマスクを皮膚組織の治癒に使用すると、変革をもたらすさまざまなメリットがあり、特に怪我、ニキビ、その他の皮膚の悩みからの回復。治療用の赤外線は、皮膚細胞の再生を促進し、治癒プロセスを加速します。血液を強化することで循環を促進するLEDマスクは酸素の供給を促進する損傷した組織に栄養を供給し、炎症を抑え、回復時間を早めます。さらに、抗炎症作用により、特定の波長は炎症を起こした肌を落ち着かせるのに役立ちます。術後のケアに最適な選択肢となります。

### 事前にプログラムされた治療時間

この FDA 承認の LED 治療装置は、可視光線と不可視光線の赤外線を組み合わせて使用し、1日30分でニキビを除去して予防し、老化した肌を治療します。

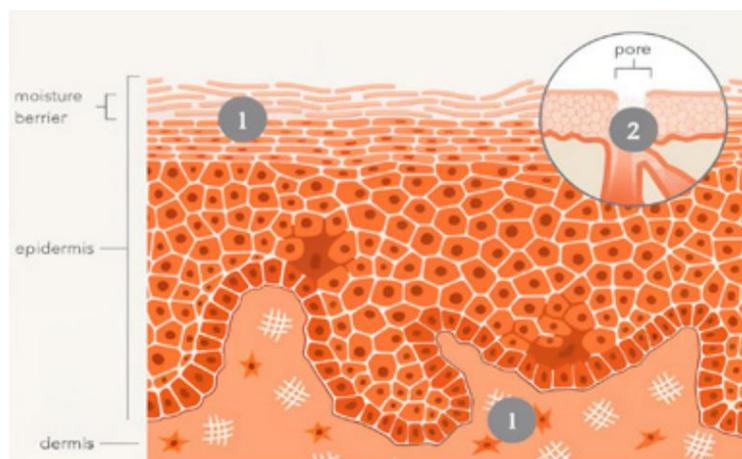

### 4. 弾性線維症

皮膚の弾性繊維の劣化を特徴とするエラスチン変性症は、たるみやハリ低下につながる可能性があります。Culiqueマスクは、特定の波長の光を利用してコラーゲンとエラスチンの生成を刺激し、肌の弾力性を高め、より若々しい印象を取り戻します。さらに、Culiqueマスクは血行を改善し、必須栄養素の供給を助け、デトックス効果も促します。その結果、肌の弾力性が向上するだけでなく、より滑らかで均一な肌色へと導きます。

### 5. 脱毛

薄毛に効果のあるCulique LEDマスクは、薄毛の改善を目指す方にとって有望な解決策となります。頭皮に装着するマスクを調整し、特に薄毛の部分に照射することで、Culiqueマスクは特定の波長の光を活用します。

毛包を刺激し、血液循環を促進します。

このプロセスは細胞の活動を促進し、新しい髪の毛の成長を促すと同時に、既存の髪の毛の強化にも役立ちます。LEDライトの優しい温かさは栄養素の吸収を高め、健康な髪の毛の成長をさらにサポートします。定期的を使用することで、髪の毛の太さとボリュームに目立った改善が期待できます。

頭皮全体の健康。

## キュリックマスクとそのアンチエイジング効果について


クリクマスクは、アンチエイジングトリートメント向けに設計された最先端のスキンケアツールで、コントローラーに「アンチエイジング」(#1)設定を備えています。この設定では、グループ877の10種類の特定周波数（22.5、0.2、132.8、158.63、429.3、533.9、678.21、834.63、888.76、942.32 kHz）が送信され、老化の様々な側面に働きかけ、肌の若返りを促します。

際立った特徴は、調整可能なデザインで、マスクの位置を調整して集中ケアを行うことができます。上向きに傾けることで、額のシワ、目の周りのシワ、鼻や頬の周りのシワにもアプローチします。

下向きに傾けると、顔の下半分に焦点が当てられ、ほうれい線や唇周りのエイジングケアに効果的です。この汎用性により、赤外線が肌の深層部に届き、最大限の効果を発揮します。



カリクアンチエイジング

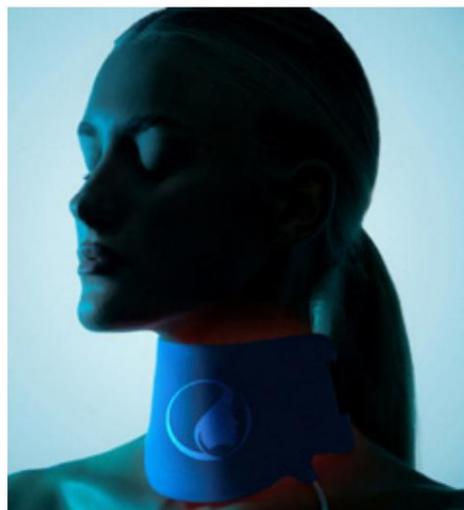

さらに、Culiqueマスクは首に巻き付ける設計のため、アンチエイジング効果をさらに高めます。この装着方法は、見落とされがちな、若々しい印象に欠かせない部位のケアに特に効果的です。赤外線が首の皮膚に浸透し、コラーゲンの生成を促進し、肌の弾力性を高めます。これにより、たるみや口周り、顎周りの小じわを目立たなくするのに役立ちます。

正確な周波数伝達と調整可能な位置調整機能の組み合わせにより、Culiqueマスクはあらゆるスキンケアルーティンに幅広く活用できるツールとなっています。額、顎、首など、ユーザーはそれぞれの悩みに合わせてトリートメントをカスタマイズでき、毎回のセッションで最大限の効果を発揮します。

クリクマスクは、先進技術とユーザーフレンドリーなデザインを駆使し、アンチエイジングスキンケアへのホリスティックなアプローチを体現するマスクです。優れた効果を発揮します。複数の周波数で赤外線を集中的に照射することで、肌を若返らせるだけでなく、ユーザーがスキンケアをコントロールする力も提供します。


## キュリックマスクのコラーゲン生成効果

Culiqueマスクは、コラーゲンの生成を促進し、肌の健康を改善するために、特定の周波数を使用する高度なスキンケアデバイスです。コントローラーの「コラーゲン生成」設定2は、コラーゲンの合成を促進するために選択された10種類の特定の周波数（0.07、0.32、18.23、37.22、57.5、62.73、86.32、89.7、96.5、236.09 kHz）を放射します。この設定は、肌の弾力性を高め、エイジングサインを軽減したい方に最適です。

マスクの調整可能なデザインにより、コラーゲン生成トリートメントを的確にターゲットにすることができます。マスクを上向きに傾けることで、額のシワ、目元のシワ、鼻や頬の周りのシワをケアできます。マスクを下向きに傾けると、口元に集中し、ほうれい線や唇の周りのシワにアプローチできます。この柔軟性により、赤外線が肌の深層まで届き、より滑らかな若々しい肌へと導きます。



コラーゲン生成

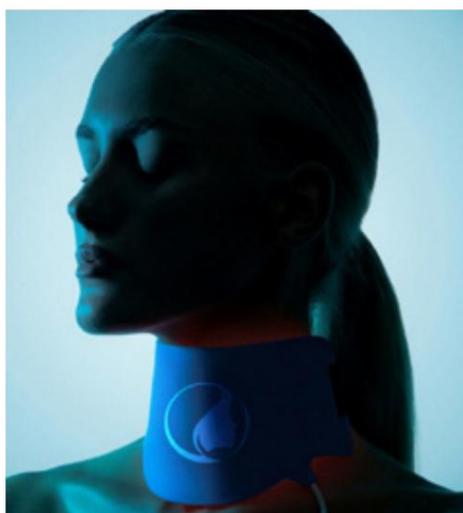

コントローラーはこれらの周波数を可視光線と不可視光線に変換し、肌に浸透して光バイオモジュレーション（PBM）を誘発します。PBMでは、ミトコンドリアに吸収された光がATP産生を促進し、細胞を活性化し、線維芽細胞の活動を刺激します。これにより、コラーゲン生成が促進され、肌の若返りが促進されます。マスクは首にも巻くことができ、見落とされがちな首周りのたるみや小じわをケアし、若々しい輪郭と滑らかな肌触りを実現します。

さらに、赤外線療法は抗炎症作用があり、慢性炎症を軽減し、コラーゲン合成に適した環境を作り出します。コラーゲン繊維のリモデリングを促進することで、マスクは肌の質感とハリを改善します。

要約すると、Culique マスクの正確な周波数伝達と多用途なデザインにより、コラーゲン生成を促進し、炎症を軽減し、全体的な肌の弾力性をサポートしてより若々しい肌を実現する、アンチエイジングスキンケアの強力なツールになります。

## 組織の治癒

### キュリックマスクの組織治癒効果

Culiqueマスクの「ティッシュヒーリング」(#3)設定は、肌と瘢痕組織の回復のための高度なソリューションを提供します。様々な組織タイプの治癒を促進するように設計された10種類の特定の周波数 (0.12、0.37、7.25、45.67、45.75、57.5、92.5、93.5、96.5、325 kHz)を送信します。この多用途マスクは、顔、首、胸、手足など、体の複数の部位に使用できるため、手術後の傷跡、怪我、ニキビ跡、その他の肌トラブルの治療に最適です。

このマスクは、フォトバイオモジュレーション (PBM)を通じてミトコンドリアの機能を高め、ATP産生を増加させることで、体の自然治癒力を高めます。コントローラーはこれらの周波数を可視光線と不可視光線の赤外線に変換し、皮膚のさまざまな深さまで浸透して細胞の修復と組織の再生を促進します。



組織の治癒



「ティッシュヒーリング」設定は、回復を妨げ、不快感を長引かせる可能性のある炎症を軽減します。炎症を緩和することで、マスクは治癒を促進する環境を育み、より迅速かつ効果的な組織修復を促進します。

光バイオモジュレーションは、赤外光が特にミトコンドリア内の色素団によって吸収されるときに発生します。

この刺激によりATPが増加し、コラーゲンとエラスチンに不可欠な線維芽細胞の活動が促進されます。

さらに、このマスクは血管拡張を促進し、血行を促進して酸素と栄養素の供給量を増加させます。これにより、代謝老廃物や炎症性メディエーターの除去が促進され、治癒が促進されます。また、抗炎症作用により、良好な治癒環境が整えられ、肥厚性瘢痕やケロイド瘢痕のリスクも軽減されます。

キュリックマスクは、創傷治癒のあらゆる段階をサポートします。初期段階では炎症を軽減し、増殖段階では細胞増殖と血管新生をサポートし、最終段階ではコラーゲンのリモデリングを促進します。この多面的なアプローチにより、このマスクは包括的な肌の治癒と回復のための貴重なツールとなります。

## 弾性線維症

### キュリークマスクによる弾性線維症治療

キュリークマスクの「エラストシス」設定 (#4) は、肌のたるみを防ぎ、弾力性を高めるために特別に調整されています。

この設定では、弾力線維症の根本的な原因に対処するように設計された 10 個のターゲット周波数 (0.05、0.12、0.87、5.27、5.62、5.193、322.53、475.17、および 527 kHz) を送信し、コラーゲンとエラスチンの生成を促進して若々しい外観を回復します。

このマスクはフォトバイオモジュレーション (PBM) 技術を採用しており、赤外線が肌に浸透してミトコンドリアと相互作用し、ATP 産生を促進します。

このエネルギー増強は細胞プロセスを活性化し、コラーゲンとエラスチンという肌の構造と弾力に不可欠な 2 つのタンパク質の合成を促進します。線維芽細胞の活動が促進されることで細胞外マトリックスが生成され、肌のハリと弾力性が強化されます。



弾性線維症



さらに、マスクは血行を改善し、酸素と栄養を肌に届け、老廃物の排出を促します。この最適な環境は、細胞の修復を促し、肌のキメを整え、たるみの回復を促進します。

キュリークマスクは線維芽細胞の活動を刺激することで、ハリと弾力のある肌を維持するために不可欠なコラーゲンとエラスチンの合成と再構築を促進します。

赤外線は炎症を軽減し、皮膚の構造的完全性を維持し、老化に伴うコラーゲンの劣化を防ぎます。

「エラストシス」設定を継続的に使用すると、肌の質感、ハリ、弾力が長期的に目に見える形で改善され、老化の兆候に対処し、若々しく弾力のある肌を促進する貴重なツールとなります。

キュリークマスクを「エラストシス」モードで定期的を使用することで、時間の経過とともに肌の弾力性を高める累積的な効果が得られます。コラーゲンとエラスチンの合成が徐々に促進されるため、肌のハリが徐々に増し、たるみが目立たなくなり、より滑らかで引き締まった肌色を実感いただけます。

## 脱毛

### 抜け毛治療のためのキュリックマスク


キュリックマスクの「ヘアロス」プログラム（#5）は、薄毛や円形脱毛症などの症状に包括的なソリューションを提供します。10種類の特定の周波数（0.06、5.07、95、127.67、275.07、455.82、515.16、684.81、712.23、993.41kHz）を組み合わせることで、毛包を刺激し、頭皮の健康を促進し、髪の毛の密度と活力を高めます。

その効果の核となるのは、フォトバイオモジュレーション（PBM）です。赤外線が頭皮に浸透し、毛包細胞内のミトコンドリアに吸収され、ATP産生を促進します。このエネルギー増強は細胞機能を活性化し、毛包の活動を活発化させ、成長を促進します。毛周期を調節する毛乳頭細胞は特に反応性が高く、休止期（テロゲン期）から成長期（アナゲン期）への移行をスムーズにすることで、髪の毛の太さと抜け毛の減少をもたらします。



脱毛

このマスクは頭皮の血行を改善し、毛根に必要な栄養素を届けることで、休止状態または弱った毛包を強化します。さらに、赤外線の抗炎症作用は、慢性的な頭皮の炎症を緩和し、髪の毛の成長に適した環境を作り出します。この炎症の軽減は、炎症によって正常な毛周期が乱れる男性型脱毛症などの症状の緩和にも役立ちます。

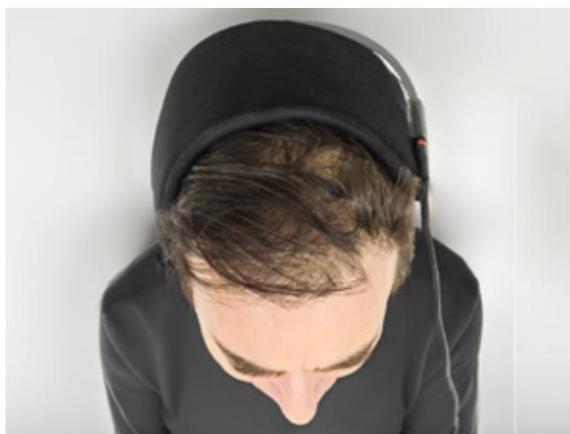

さらに、キュリックマスクはコラーゲンとエラスチンの生成を促進することで頭皮の健康をサポートします。これらのタンパク質は頭皮の構造的健全性に貢献し、毛包が健やかに成長するための健全な基盤を提供します。赤外線は毛包内の幹細胞を活性化し、

ダメージを受けた髪の毛の構造を再生し、新しい髪の毛の成長を促進するために不可欠です。

マスクの高度な技術を活用することで、ユーザーは総合的に脱毛に対処することができ、毛包機能の改善、炎症の軽減、血行促進、頭皮の強化といった恩恵を受けることができ、これらはすべて、髪の毛の活性化と豊かさにつながります。

よくある質問

## よくある質問

- Culique IR マットを肌に使用するときは、目を開けたほうがよいでしょうか、それとも閉じたほうがよいでしょうか？

フェイシャルスキンケアで最適な結果を得るには、目を閉じておくことが不可欠です。目を保護するだけでなく、赤外線ライトがまぶたやその周辺を効果的に治療するためです。光の強さが気になる場合は、Culique マット使用時に遮光マスクを着用するか、コントローラーを「弱」に設定してより快適にご使用ください。

- Culique 赤外線マスクを使用する場合、Rife Professional V4 のどの設定を使用すればよいですか？

治療したい皮膚疾患の正確な周波数を調べることをお勧めします。多くの場合、機器のプリセット内に疾患名が記載されています。そうでない場合は、ETDFLブック（ETDFL.COMから無料でダウンロードできます）を使用して、皮膚疾患の治療に必要な周波数を調べてください。

- 赤外線マスクアクセサリと一緒に使用する最新の Rife マシンはどこで購入できますか？

Rife Professional V4は、ETDFL.comストアのショッピングカートから直接ご購入いただけます。発売は2025年以降になる可能性がございます。

- Culique赤外線マスクを肌に使用すると、敏感さを感じます。

まずはコントローラーの「低」設定から始め、マスクが肌に強く押し付けられず、快適にフィットすることを確認してください。もし過敏に感じたら、コントローラーの強度設定を「低」にしてください。マスクは肌にゆるめにフィットし、顔にきつく締め付けられないようにしてください。


- マスクが顔にフィットせず、肌の周りに隙間ができてしまいます。助けてください！

Culique赤外線マスクのベルクロストラップを調整して、肌にぴったりと快適にフィットするようにしてください。マスクが肌にぴったりと密着しつつも、締め付けすぎないようにすることで、効果的に周波数が伝わります。

- これらのアクセサリは犬や猫などの動物に使用できますか？

いいえ、Culique 赤外線マスクは人間の皮膚治療用に特別に設計されており、動物には使用しないでください。

- 24個の可視ライトと24個の不可視ライトの特定の配列の目的は何ですか。また、なぜこの順序で配置されているのですか。

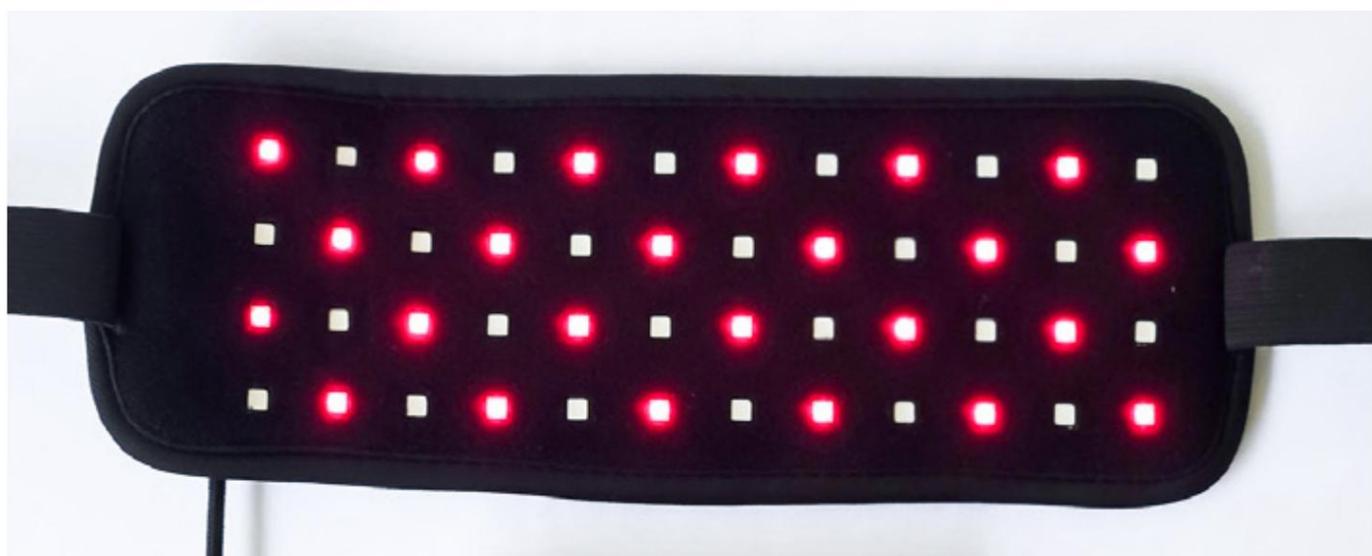

24個の目に見えない赤外線ライトは、指定された帯域幅にわたって特定の周波数を放射するように設計されており、皮膚に直接作用します。目に見えない赤外線ライトは、非常に調和のとれた光帯域幅を生成するように設計されており、皮膚との密着性を最大限に高めます。これらの目に見えない波長は、皮膚への光ストレスを最小限に抑えながら、効果的な治癒伝達を確実にします。光を伝達媒体として利用することで、目に見えない赤外線ライトは、皮膚の様々な構造に標的の周波数を伝えます。

24個の可視赤色LEDは、皮膚表面に吸収されやすい光を発することで、スキンケアにおいて重要な役割を果たします。この可視光は細胞活動を刺激し、コラーゲン合成や血行促進など、様々な有益なプロセスを促進します。赤色LEDは血流を改善することで、皮膚細胞に必要な栄養素と酸素を届け、組織の修復と再生を促進します。

このプロセスは、肌の質感や色合いを改善するだけでなく、小じわやシワを軽減し、より若々しい外観に貢献します。

24個の可視赤色LEDと24個の不可視赤外線LEDの配置は、綿密かつ戦略的に設計されています。この配置により相乗効果が生まれ、両方の光が相乗的に作用し、治療効果を最大限に高めます。可視赤色光は表皮層に作用し、表面レベルの治癒と若返りを促します。一方、不可視赤外線は真皮の深層まで浸透し、コラーゲンの分解や炎症といった根本的な問題に対処します。可視光源と不可視光源の調和のとれた相互作用により、肌の様々な層に効果的にアプローチする包括的な治療アプローチが実現します。

# 保証と免責事項

## 保証

- DOA保証:Culique赤外線マスクが以下の原因による損傷を伴って届いた場合、  
運送業者/宅配業者の場合は、すぐに交換いたします。
- 3ヶ月間の交換保証 :Culique赤外線マスクが通常の使用状況下で破損した場合、90日以内に交換いたします。新しい商品をお客様のご住所までご返送いただく際の送料は、お客様負担となります。
- Culiqueマットには、44個の赤外線LEDと不可視赤外線LEDが搭載されており、そのうち24個は肉眼では見えないように設計されています。これらの不可視LEDはスマートフォンのカメラでのみ検出可能であり、24個の不可視LEDが見えなくても、使用中のマットの機能と効果を確認できます。保証条件に関しては、ドット抜けなどの単一のLEDの不具合は、欠陥ではなく「通常の消耗」に分類されることがよくあります。通常、LEDアレイは、特定の領域に複数のドット抜けがある場合、またはそれらが密集している場合にのみ欠陥とみなされます。
- 衛生上の理由により、Culique赤外線マスクは当社のサービスでは修理できません。  
センター。保証期間中は必ず新品をお送りいたします。

## 免責事項

- ETDFL (ETDFL.com) ラボは、Culique赤外線マスクが特定の皮膚疾患を治癒することを保証するものではありません。赤外線マスクの技術は、EUで3年以上にわたり研究者によってテストされており、RDPV4およびCuliqueコントローラーと併用することで良好な結果が得られています。
- Culique赤外線マスク技術は広範な研究に基づいていますが、共同研究者は、その研究結果や技術が  
皮膚疾患の治療に。
- Culique 赤外線マスクは、個人または臨床的に購入できるユニークな製品です。



## ETDFLについて



ETDFL.com



ETDFLは、世界中の12のクリニックが現在も行っているプロジェクトです。これらのクリニックでは、Quantum SCIOバイオレゾナンスマシンを用いて実際のクライアントの疾患周波数を記録し、ロイヤル・ライフマシンによる治療に適していると判断される最も正確な10の周波数を生成します。このプロジェクトは、オリジナルのCAFL周波数リストが廃止された2006年に開始されました。ETDFLは新しいリストとなり、現在では世界中の10万人以上のロイヤル・ライフマシンユーザーに使用されています。この周波数の精度は、世界中のクリニックや自宅でこの周波数リストを使用しているクライアントの良好な結果に表れています。

ETDFLベルリン（ドイツ）は、電気周波数療法（EFT）用の最新のアクセサリーと機器を開発しています。Culiqueマスクは、Culique Labs（ドイツ・ベルリン）とETDFL Labs Germanyが共同開発した独自のスキンケア製品です。

ETDFLは年に一度更新されます。最新のPDF版はETDFL.comでご覧いただけます。

皮膚疾患、皮膚治療、Culiqueマスクに関する追加情報（本書で取り上げられていない皮膚疾患グループを含む）については、ウェブサイトCulique.comをご覧ください。

ETDFL.comのPDF版ETDFLでは、ETDFLデータベースで肌の悩みの頻度を検索できます。このリストは、ETDFL.comで提供されているリストよりも最新のものとなる可能性があります。

この本。

Culique.comスキントリートメントマスクは、ETDFL Royal Rife周波数セットのすべての使用を許可されています©ETDFLベルリンドイツ



クリクストアは、ニキビから老化の兆候まで、幅広い肌の悩みに対応するために設計された高度な赤外線技術を活用した専門的なスキンケアソリューションを優先しています。

## お問い合わせ

 [www.culique.com](http://www.culique.com)

 206-708-6408

 [etdfl.web@gmail.com](mailto:etdfl.web@gmail.com)

 **CuliqueストアUSA**  
1712 パイオニアアベニュー、  
シャイアン、ワイオミング州 82001、米国

 **クリク・ラボ**  
国際ハンデルセントルム、  
ベルリン フリードリヒ通り95番地  
ドイツ