



ビーマー PEMF

パルス電気周波数磁場マット www.beamer.tech



ビーマーPEMFマット



ビーマーコントローラー

命令
本

英語



索引


について		
ビーマーPEMFテクノロジーの遺産	03
Beamer PEMF マットとは何ですか?	04
製品説明	05,06
PEMF はどのように機能しますか?	07
技術的説明		
ビーマーPEMF療法装置	08
接続方法	09
コントローラー機能		
ビーマーコントローラー	10,11
タイミングの選択		
治療について	11
推奨強度設定		
治療について	11
高度な機械		
接続	12
ビーマーPEMF		
プログラム #1	13
PTSDとストレス		
プログラム #2	14
関節炎の痛み		
プログラム #3	15
筋肉痛		
プログラム #4	16
腰痛		
プログラム #5	17
高度な治療	18
条件	19,20
外皮系	21
骨格系	22
筋肉系	23
リンパ系	24
呼吸器系	25
消化器系	26
神経系	27
内分泌系	28
循環器系	29
尿路系	30
生殖器系	31
その他のカテゴリー	32
よくある質問		
よくある質問	33,34
保証と免責事項	34
ETDFLについて	35

について

ビーマーPEMFテクノロジーの遺産

ロイヤル・ライフ博士は、周波数ベースのウェルネス技術の先駆者であり、生体電気周波数とそれが身体の自然治癒プロセスに与える影響に関する画期的な研究で知られています。彼の研究は、現代の周波数ベース療法的基础を築き、非侵襲的なウェルネスソリューションの進歩を促しました。

この伝統を礎に、ビーマーテックはパルス電磁場（PEMF）技術によって周波数療法に革命をもたらしました。光ベースの機器とは異なり、ビーマーテックは標的を絞った電磁パルスを照射することで、細胞の修復を促し、血行を改善し、全体的な回復を促進します。

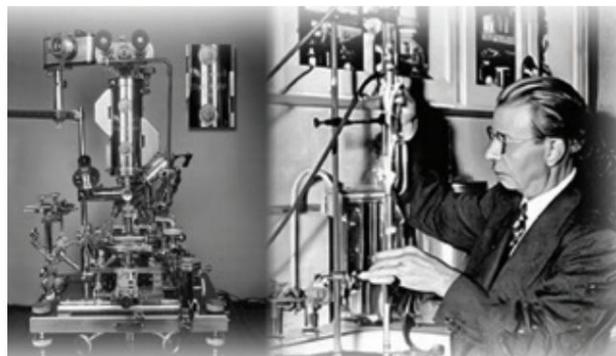

ライフ博士の研究は、正確な周波数適用の重要性を強調しており、これはビーマーテックのPEMF療法プログラムの中核を成す原則です。最適化されたPEMF周波数を送信することで、ビーマーテックはユーザーに強力かつ薬物を使用しない健康へのアプローチを提供し、痛みの緩和、筋肉の回復、そしてリラクゼーションをサポートします。

今日、PEMF技術の進歩は、ホリスティックヘルスとウェルネスの未来を形作り続けています。Beamer-Techは、科学的に検証された周波数療法を現代的で使いやすいPEMFシステムに統合することで、この伝統を尊重し、高品質で非侵襲的な回復ソリューションを誰もが利用できるようにしています。

Beamer PEMFテクノロジーは、大型マットを通して伝達されるパルス周波数を用いて、人体の臓器系のバランスを整える全身療法です。PEMF療法は60年以上にわたり効果的に使用され、体内の恒常性とバランス状態を達成するための主要な治療法であり続けています。

BEAMER PEMF マットとは何ですか？

ビーマーテクノロジーは、複数の周波数範囲にわたる、標的を定めて深部まで浸透するパルス電磁場（PEMF）を利用し、最適化されたエネルギー波を身体に届けます。これらの慎重に調整されたPEMF信号は、細胞機能を高め、血行を改善し、自然治癒力を促進することで回復を早めるように設計されています。

プロセス。



ビーマーPEMFマット

ビーマーコントローラーは直感的なビーマーをシームレスに管理するために設計されたユーザーフレンドリーなデバイス PEMFマット



ビーマーコントローラー

特定の帯域幅にわたってターゲットを絞ったパルス電磁周波数を送信し、ビーマーに最適な出力を提供します。

強化用マット治療効果。

5つの治療モード

- ビーマーPEMF
- PTSDとストレス
- 関節炎の痛み
- 筋肉痛
- 腰痛

ビーマー PEMF

パルス電気周波数磁場マット

ビーマーPEMFマット

Beamer Mat - 回復、リラクゼーション、痛みの緩和を促進するためにターゲットを絞ったパルス電磁場を届けるように設計された全身用 PEMF マットです。

全身の快適さと

汎用性

ビーマーマットは、快適で適応性のある治療経験、ユーザーが横になって全身PEMF治療を受けます。柔軟で軽量構造により、ベッドやリクライニングチェアに簡単に設置可能または治療台で、さまざまな治療環境に最適です。

調整可能な強度

調整可能な強度ボタンを押すだけで低強度から高強度に切り替えられます

最適化されたPEMF周波数プログラム

ビーマーマットは、体の重要な部位をターゲットに設計された特殊なPEMF周波数プログラムを採用しています。これらの精密に調整された電磁パルスは、血行促進、細胞の回復、そして全体的な健康を促進します。

自動タイマー

自動タイマーは30、60、90を許可します
120分



製品説明

ビーマーマットは、最適な回復と健康のために、標的部位にパルス電磁場を照射するように設計された強力なPEMF療法機器です。科学的に調整されたPEMF周波数プログラムを使用することで、ビーマーマットは血行促進、筋肉の回復サポート、そして全身のバランス調整を促進します。

多用途で使いやすいデザインのビーマーマットは、非侵襲性で薬剤を使用しないアプローチで、ストレス管理、痛みの緩和、リハビリテーションを実現します。日常的な健康管理にも、集中治療にも、ビーマーマットは効果的で快適な治療セッションを保証します。

私たちの約束

治療革新の推進 :先駆者たちに触発されて

ロイヤル・ライフ博士は医療技術の先見の明を持つ人物であり、周波数療法における画期的な研究で知られています。彼の先駆的なアプローチは、特定の周波数送信を用いて治療と健康を促進し、現代の治療法の進歩の基礎を築きました。

Beamer-Tech はこれらの原則を基に、循環を高め、細胞の再生をサポートし、全体的な健康を促進するように設計された科学的に裏付けられた技術であるパルス電磁場 (PEMF) 療法を採用することでこの伝統を継承しています。

ビーマーテックマットは、非侵襲性療法の新たな進化を象徴する製品です。PEMF周波数を標的とし、回復、疼痛管理、リラクゼーションを最適化します。この進歩は、人々がホリスティックな健康と治療ケアを体験する方法を変革し、現代の健康ニーズに応える強力で薬物を使用しないソリューションを提供します。

beamer.techについて

グローバルプレゼンス

Beamer-Techは国際的に強力なプレゼンスを有し、PEMF療法ソリューションはドイツ、英国、米国、香港、日本などの主要市場で提供されています。非侵襲性ウェルネス技術の進歩に尽力するBeamer-Techは、最先端のPEMF療法へのアクセスを提供し、回復、リラクゼーション、そして全体的な健康をサポートします。

イノベーションと開発

Beamer-Tech PEMFマットは、長年の研究と卓越したエンジニアリングに基づき開発され、パルス電磁場 (PEMF) 療法の最新技術を取り入れています。家庭用と臨床用の両方を想定して設計されたこの革新的なマットは、循環、痛みの緩和、細胞再生を最適化するよう科学的に調整されており、ユーザーに実証済みの効果的な治療ソリューションを提供します。

Beamer-Tech は、継続的なイノベーションに注力し、健康と回復の向上に向けた薬物を使わない非侵襲的なアプローチを求める人々に最先端の PEMF テクノロジーを提供しています。

製品説明

主要コンポーネント

Beamer.Techシステムには、Beamer PEMFマットを効率的に制御するために設計された、多機能な5プログラムコントローラーが搭載されています。このコントローラーにより、ユーザーは複数の治療モードから選択し、治療時間と強度レベルを調整して、自分に合った治療体験を得ることができます。

システムには以下が装備されています：

- PEMF療法に最適化された高性能ビーマーマット1枚
- 直感的なインターフェースを備えた専用のビーマーマットコントローラー
- 安全で効率的な電力伝送を実現する耐久性のある接続ケーブル
- 国際互換性のための交換可能なプラグを備えたユニバーサル電源アダプター
- 持ち運びに便利な収納・旅行用バッグ

ホリスティックウェルネスのための高度なPEMF療法

従来の光療法装置とは異なり、ビーマーマットはパルス電磁波を利用しています。

フィールド (PEMF) テクノロジーは、次のような効果をもたらすターゲット周波数を配信します。

- 循環と酸素供給を促進
- 筋肉の回復と痛みの緩和をサポート
- ストレス軽減とリラクゼーションを促進する

ビーマー マットは、家庭用と臨床用の両方に設計されており、回復と全体的な健康のために非侵襲的で薬物を使用しないアプローチを提供します。

利点

• 細胞機能の強化

ビーマーテックマットは、標的を絞ったパルス電磁場 (PEMF) 周波数を照射することで、身体の自然治癒プロセスをサポートするように設計されています。最適化されたエネルギー波は、細胞の再生を促進し、組織の修復を促進し、全体的な健康状態を改善します。

• 回復のための高度なPEMFテクノロジー

正確なPEMF周波数を放射することにより、Beamer-Tech Mat は、次のような重要な生物学的プロセスを刺激するのに役立ちます。

- 炎症を軽減する
- 痛みを和らげる
- 体の免疫反応を強化する
- 回復時間の短縮

• 健康のための非侵襲的ソリューション

Beamer-TechのPEMFテクノロジーは、薬剤を使わず、非侵襲的に健康と回復をサポートするアプローチです。細胞機能の最適化、リラクゼーションの促進、疼痛管理のサポートに役立ち、日常の健康維持と治療に理想的なツールです。

• 全身PEMF療法

Beamer-Tech マットは多用途の全身治療設計を備えており、ユーザーは深部まで浸透する PEMF 治療を体験して、血行の改善、筋肉の弛緩、全体的な健康効果を得ることができます。

PEMF はどのように機能しますか？

安全で信頼性が高く、認証済みのPEMF技術を基盤とするBeamer PEMFは、リラクゼーション、睡眠改善、瞑想サポート、痛みのコントロール、そして健康全般に効果が実証されています。細胞レベルで直接作用する唯一のウェアラブルデバイスであり、他の製品にはない独自のメリットを提供します。

PEMF :健康への自然で革新的なアプローチ

PEMF テクノロジーが、治癒、リラクゼーション、活力を促進して、健康をどのように向上できるかをご覧ください。

- 迷走神経を刺激します :迷走神経を活性化し、リラックス効果を高め、ストレスを軽減し、全体的な健康状態を改善することで、神経系の調整を助けます。
- リラクゼーションを促進 :細胞スパのような機能で、ストレスや緊張を和らげながら、睡眠、集中力、瞑想を促進します。
- 痛みを和らげる :炎症を抑え、改善することで痛みを効果的に緩和します。
対象地域での循環。
- 細胞機能のバランスを整える :細胞活動を最適化し、全体的な健康と平衡。
- 血流を促進 :循環を促進し、必須栄養素と酸素を効率的に供給します。

周波数が異なれば、メリットも異なる

周波数は、私たちの健康に影響を与え、自然で馴染みのある方法で体の機能を最適化する上で重要な役割を果たします。

- デルタ波:深いリラクゼーションとより良い睡眠の質を促進します。
- シータ波:リラクゼーションを促し、ストレスを軽減し、記憶力を高めます。
- アルファ波:落ち着きを生み出し、学習と精神的な明晰さをサポートします。
- ベータ波:集中力、素早い思考力、精神的なパフォーマンスを高めます。
- ガンマ波:明瞭性と複雑な情報処理能力を高めます。

当社の PEMF デバイスを使用した後、どのようなことを感じますか？




深いリラクゼーション

穏やかさとストレス解消を体験してください。



気分の向上

よりバランスが取れ、前向きになり、リフレッシュした気分になります。

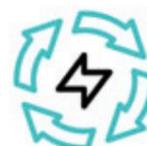

エネルギー増加

活力と集中力が自然に高まります。

- 自然で非侵襲的 : PEMF は侵襲的な方法を使わずに、自然に健康を増進します。
- 時間効率:短時間のセッションですぐに効果が現れます。明晰で活力のある一日のスタートに最適です。
あなたの日。
- 全身バイオハッキング : PEMFは、全身の精神的および肉体的健康を促進します。
健康。
- 科学的根拠 :研究により、PEMFがリラクゼーション、回復、そして全体的な健康に果たす役割が確認されています。
ウェルネス。
- 使いやすい: NeoRhythm はシンプルでアクセスしやすく、誰にとっても使いやすいです。

技術的説明

ビーマーテックPEMF療法装置

周波数範囲

0:01 Hz - 50 MHz でテスト済み

最適化されたPEMF周波数を送信して、循環、痛みの緩和、

回復

PEMF周波数波と効率

最大の治療効果を得るために、標的を定めた電磁パルスを通じてすべてのPEMF治療周波数を供給します。

全身治療において高い効率と効果を保証するために最適化された波形を生成します

Beamer-Tech PEMFマットの強度設定

治療を開始するには、Beamer-Tech コントローラーを低強度レベルに設定します。

徐々にHIGHまで上げていくことで、より効果的なセラピーセッションが可能になります。30分、60分、90分、120分のプログラムから選択でき、施術時間をカスタマイズできます。

- 最適な効果を得るために、対象部位がPEMFマットに完全に接触していることを確認してください。

治療。

- より高い強度が必要ない場合は、快適さのために LOW 設定に戻してください。

- 敏感な方のために、薄い綿のシートをマットの上に敷いて、

快適。

クリニックの使用と清掃

- 家庭と臨床の両方で使用できるように設計されており、非侵襲的な検査として最適です。

ウェルネスソリューション。

- 複数ユーザー環境では、各ユーザーの使用後に湿らせた布で表面を拭いてください。

使用。

- アルコールベースのクリーナーの使用やマットを水に浸すことは避けてください。

電子機器が損傷します。

ビーマー PEMF

パルス電気周波数磁場マット

www.beamer.tech


接続方法

Beamer Matコントローラーへの電源の接続

ビーマーに付属の電源アダプター
マットコントローラーは、


世界各国の電圧（110V～250V）に対応しています。電源アダプターには、国際的に使用できるように複数の国に対応したプラグが付属しています。

電源アダプターを電源コンセントに接続し、電源プラグをマットコントローラーの電源ポートに接続します。電源プラグをマットコントローラーに接続すると、赤色の電源インジケータが点灯します。

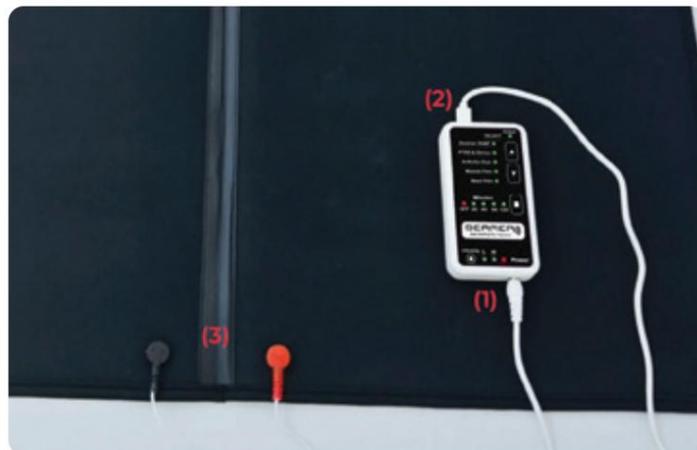

Beamer MatをMat Controllerに接続する

- まず、赤と黒のボタンを Beamer PEMF マットに接続します。
- ビーマーマットの上部には赤と黒の球体があります
- これは、マットに接続するプラグの色を示しています。対応するプラグ接続ポイントはマットの底面にあります。各コネクタをしっかりと差し込んでください。

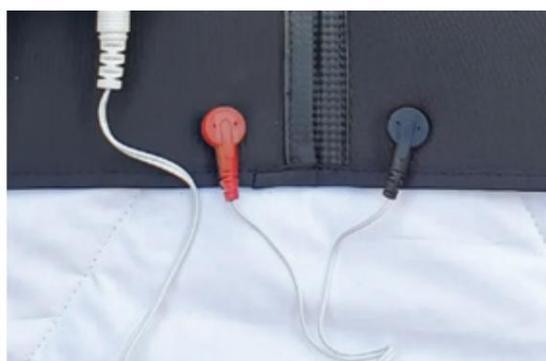


ビーマーマットの使い方

- マットを平らな面に置きます。ベッド、ソファ、治療台の上に置くことができます。
- Beamer マット コントローラーを接続する - 赤と黒のケーブルをマットの対応するポートに差し込みます。
- 治療モードを選択 - 5つの対象プログラムから選択します。
- Beamer PEMF - 一般的な健康
- PTSDとストレス - リラクゼーションと精神的な明晰さ
- 関節炎の痛み - 関節痛の緩和
- 筋肉痛 - 筋肉の回復
- 腰痛 - 脊椎と腰部のサポート
- 治療期間を設定します - オプションには 30、60、90、または 120 分が含まれます。
- 強度を調整 - 低 (L) と高 (H) の設定を選択します。
- リラックスしてセッションを楽しむ - ユーザーはマットの上に直接横たわったり、薄いシートを敷いて快適さが増しました。

コントローラー機能

ビーマーコントローラー

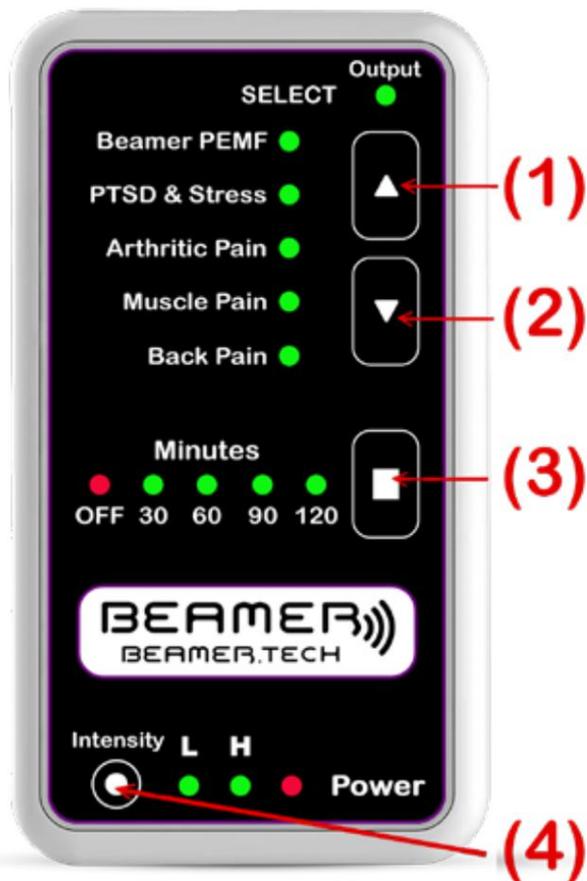

ビーマーコントローラー

(1)ボタン1: 上

上矢印を使用して、Beamer PEMF カテゴリ 1 ~ 5 を移動します。

(2)ボタン2 :下

下矢印を使用して、Beamer PEMF カテゴリ 1 ~ 5 を移動します。

(3)ボタン3 :時間調整

治療時間をOFF = いいえから切り替えるために使用します
デバイスへの出力: 30分、60分、90分、120分

(4)ボタン4: パワー強度

L = 低電力PEMF出力
H = 高出力PEMF出力

Output

 出力LEDオン:コントローラーはアクティブです
PEMF 周波数信号を Beamer PEMF マットに送信し、最適な回復と健康のためにターゲットを絞った電磁パルスを供給します。

Power


 電源LEDオン:コントローラーは電源 (電源アダプタ)に接続

* コントローラーポート側面図

(1)電源ポート (電源入力)

(2) USB-Cから

CS0126 ソケットケーブル**(3)**

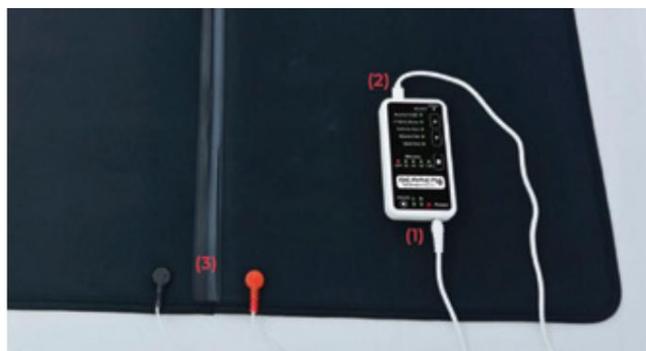

デバイスの互換性

Beamer-Tech マットは以下と完全に互換性があります。

- RDPV3
- RDPV4
- ビーマーテック コントローラー

高品質のコネクタとユニバーサル デザインを備えた Beamer-Tech Mat は、複数のプラットフォーム間での信頼性の高い操作を保証し、多用途で効果的な PEMF 療法ソリューションを実現します。

Beamer-Techマットの接続性と互換性

Beamer-Tech Mat は、コントローラーやその他の互換性のあるデバイスとシームレスに接続できるように設計されています。

接続ケーブルの仕様

1. RDPV4とビーマーコントローラーインターフェースケーブル

- タイプ: USB-C - デュアル CS0126 ソケット (ブラック/レッド)
- 機能: RDPV4ユニットとビーマー PEMF マット
- 機能: Beamer コントローラーと Beamer PEMF マット間の標準化された接続を提供します。

2. RDPV3 レガシーインターフェースケーブル

- タイプ: RCA からデュアル CS0126 ソケット (黒/赤)
- 機能: RDPV3 システムとの下位互換性を有効にします。



USB-C



CS0126 ソケットケーブル



黒+赤 CS0126 コネクタケーブル

タイミングの選択

治療について

利用可能な治療時間オプション:

- 30分 - 最短の施術時間で、素早くリラックスして血行を良くするのに最適です。
サポート。
- 60分 - 筋肉の回復と痛みの緩和のための標準セッション。
- 90分 - 深いリラクゼーションと集中的な癒しのための延長セラピー。
- 120分 - 全身に包括的な PEMF 効果をもたらす最大セッション時間。

推奨強度設定

治療について

推奨設定:


- 低強度 (L)から始めましょう - 初めて使用する方や敏感な部分のある方に最適です。
- 高強度 (H)に増加 - より深い筋肉の弛緩のために推奨されます。
循環の促進、回復のサポート。
- 必要に応じて調整 - 不快感が生じた場合は、より快適な体験のために低強度に戻してください。

高度な機械接続

Beamer MatをRife Digital Professional V4に接続する



4つのUSB-C出力
4人用または4畳用

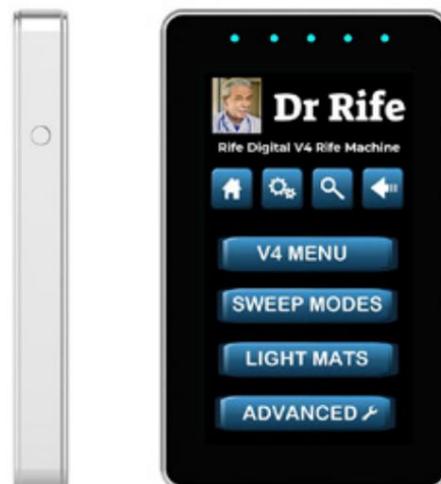

ライフデジタルプロフェッショナルV4 (RDPV4)



開業医または個人ユーザーが特定の PEMF 周波数グループを選択する必要がある場合は、ビーマー マットと組み合わせて Rife Digital Professional V4 Rife Machine を使用し、要件に最も近いプリセット プログラム グループを選択することをお勧めします。

赤と黒のプラグが付いた白いケーブルを Beamer PEMF マットに接続します。

ビーマーマットには赤と黒のインジケーターが付いており、マットに接続するプラグの色を示します。

Beamer マットを Rife マシンに直接接続し、Rife Digital Professional V4 メニューで「パルススイープ」を選択してください。パルススイープは PEMF の「SWEEP」コマンドです。パルススイープは、Beamer PEMF マットおよび Beamer PEMF アクセサリと併用する場合に推奨される出力コマンドです。



Rife Digital Professional で個別のグループ番号 (1~30) を選択する場合 V4 の場合は、推奨出力コマンドとしてメニューから「PULSE SWEEP」を選択します。


ビーマーPEMF（プログラム#1）

ビーマー PEMFマット – プログラム1（痛みの緩和）

Beamer PEMF（パルス電磁場）デバイスは、レイダウンマットと5つのプログラムを備えたコントローラーで構成される全身治療システムです。プログラム1は、全身の痛みの緩和に特化して設計されています。ETDFL.comから提供される0.16kHzから750kHzまでの10種類のターゲット周波数を備えています。各周波数は10分間作動し、相乗効果を発揮して治療を促進し、痛みを軽減し、全体的な健康をサポートします。



PEMF療法は、パルス状の電磁波を放射することで、身体の自然な電気機能と細胞機能を刺激します。プログラム1では、これらの低周波パルスが身体に浸透し、血流の促進、細胞代謝の改善、炎症の軽減、組織の修復を促進します。これらは痛みの軽減に重要な要素です。

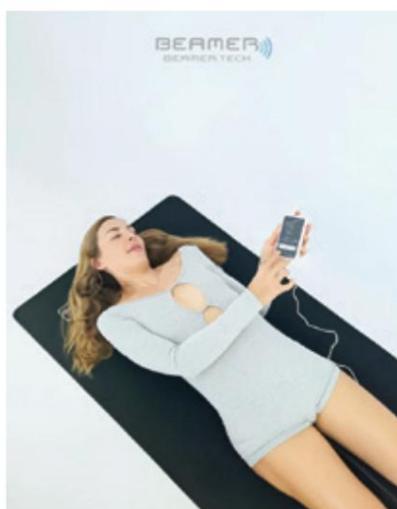

0.16 kHz や 0.35 kHz などの低い周波数は神経系をターゲットにし、組織の奥深くまで浸透して脳の痛みの知覚を軽減します。

5.26kHzや27.5kHzといった中音域の周波数は、筋肉の弛緩をサポートし、緊張した筋肉や酷使された筋肉の修復を促進します。225.47kHzや750kHzといった高音域の周波数は、酸素供給、解毒、微小循環を改善し、痛みの緩和と組織の回復をさらに促進します。

ユーザーは30分、60分、90分、120分のセッション時間を選択できます。関節炎、線維筋痛症、筋肉の硬直などの慢性疼痛症状には、90分から120分が最適な結果をもたらすと推奨されます。セッション時間を延長するとATPが刺激されます。

（細胞エネルギー）生成、栄養素の供給の改善、硬直の軽減そして炎症。

全身用ビーマーマットは柔軟性に富んでおり、ベッド、ソファ、リクライニングチェアなどに置いて快適に使用できます。非侵襲的な設計のため、痛みの緩和における薬物療法や理学療法 の代替として、または補完として、安全かつ自然な方法でご使用いただけます。

PTSDとストレス（プログラム#2）

ビーマー PEMF マット – プログラム 2 (ストレスと PTSD の軽減)

Beamer.Tech PEMFマットは、パルス電磁場（PEMF）療法を用いてストレスやPTSDの症状を緩和するプログラム2を搭載しています。0.14kHzから912.33kHzまでの10種類の特定周波数を、それぞれ10分間照射します。セッション時間は30分、60分、90分、120分から選択できます。深部神経系への働きかけと長期的な効果を期待する場合は、90分から120分が推奨されます。



PEMF は、体の生体電気システムと相互作用する低周波パルスを放射することで機能し、循環、細胞の修復、神経のバランスを強化します。

プログラム2は、感情のコントロールと闘争・逃走反応に関わる重要な領域である大脳辺縁系と自律神経系をターゲットにしています。0.68kHzや2.5kHzといった低周波数は副交感神経系を活性化し、落ち着きを促します。一方、655.2kHzや912.33kHzといった高周波数は神経同期を促し、炎症を軽減します。



このプログラムは脳波の同調も促進します。

0.14～60kHzの周波数はデルタ波とシータ波を刺激して深いリラクゼーションをもたらし、中音域（122.53～300kHz）の周波数はアルファ波を刺激して穏やかな覚醒をもたらします。これらのパターンは、コルチゾール値を低下させ、睡眠を改善し、筋肉の緊張や疲労などの身体症状を和らげるのに役立ちます。

特に、496.01kHzと750kHzは神経可塑性を刺激し、脳がトラウマ的な刺激に対してより健全な反応を形成するのに助ける可能性があります。マットは全身を覆うデザインで、ユーザーは快適にリクライニングできるため、運動機能に問題のある方や強い不安を抱える方に最適です。セッション中は軽装でいることで、最適な電磁波吸収を確保できます。

臨床フィードバックによると、プログラム2を定期的を使用すると、不安が軽減され、気分が改善され、回復力が高まることが示されています。薬物を使用せず、非侵襲的な選択肢であるため、ストレスやトラウマに対する従来の治療法を強力に補完します。

回復。

関節炎の痛み（プログラム #3）

ビーマー PEMF マット – プログラム 3 (関節炎と関節の緩和)


Beamer.Tech PEMFマットは、関節炎、変形性関節症、リウマチに特化したプログラム3を提供しています。厳選された10種類の周波数（0.05kHz～642.91kHz）を、それぞれ10分間パルス状に照射し、30分から120分のセッションで効果を発揮します。関節や結合組織への浸透を高め、痛みの緩和と治癒を促進するには、90分から120分のセッションが推奨されます。



PEMF 療法は細胞の修復を刺激し、炎症を軽減することで効果を発揮します。プログラム3の周波数はETDFL.comから提供されており、軟骨再生、滑液の生成、そして痛みの緩和を目的として選択されています。低周波数（0.05～0.9kHz）は神経痛と関節の硬直に作用します。中周波数（9～55.33kHz）は患部におけるATP産生を促進します。高周波数（398.4～642.91kHz）は炎症性サイトカインを抑制し、組織の再生を促進する可能性があります。

特に、11.09kHzや225.47kHzといった周波数は、コラーゲンの生成を促進し、軟骨の破壊を遅らせる可能性があります。425.71kHzや522.53kHzといった周波数は、関節液のバランスを整え、関節の潤滑を改善すると考えられています。この周波数の組み合わせは、摩耗性関節炎と自己免疫性関節疾患の両方に効果があります。

痛みの緩和は、神経調節、つまり神経信号の伝達を抑制し、天然のエンドルフィンの放出を刺激することで実現されます。642.91kHzのような周波数は、痛みの感受性を低下させ、リラクゼーションを促進するのに特に効果的です。

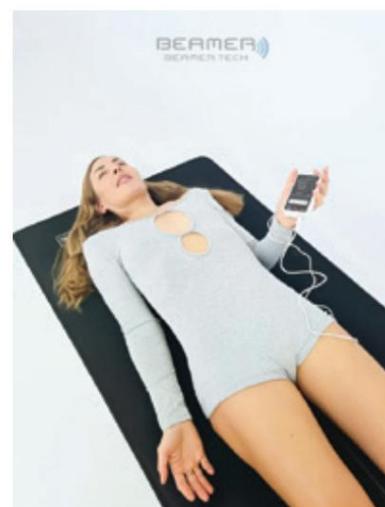

マットは全身を覆うデザインで、ユーザーは快適にリクライニングしながら特定の関節を刺激できます。痛みのある部分を直接マットの上に置くことで局所的な効果を最大限に引き出し、全身をカバーすることで広範囲の炎症を緩和します。

プログラム3は非侵襲性で薬剤を使用せず、関節炎の進行を遅らせる効果が研究で裏付けられています。週3～5回の定期的なセッションは、運動や抗炎症食などの生活習慣と組み合わせることで、NSAIDsへの依存を軽減し、関節可動域を改善する可能性があります。

筋肉痛（プログラム#4）

ビーマーPEMFマット – プログラム4（筋肉と神経の痛みの緩和）


Beamer.Tech PEMFマットのプログラム4は、10種類のターゲット周波数（0.03kHz～568.43kHz）をそれぞれ10分間照射することで、筋肉の緊張や神経関連の痛みを和らげるように設計されています。施術時間は30分から120分までで、最適な効果を得るには90分から120分が推奨されます。全身に使えるマットなので、横になったり座ったりして快適に過ごすことができ、局所的な痛みと全身的な痛みの両方を和らげることができます。



PEMF療法は、細胞の修復、炎症の軽減、神経の調節を通じて痛みに対処します。低周波（0.03～0.9kHz）は深部の筋線維を弛緩させ、末梢神経を落ち着かせます。中周波（7.5～20kHz）は、ストレスを受けた組織におけるATP産生を促進し、回復を促します。高周波（322.06～568.43kHz）は、急性または慢性の神経痛における痛みの信号を遮断するのに効果的です。

プログラム4は、電位依存性イオンチャネルとの相互作用を通じて神経機能にも作用します。0.78kHzや377.3kHzといった周波数は、坐骨神経痛や神経障害によく見られる過剰に活動する神経を安定させるのに役立ちます。一方、425.71kHzは、疼痛知覚の亢進に関連する化学物質であるサブスタンスPを減少させる可能性があります。

カルシウムイオンの調節により、筋肉の弛緩が促進されます。0.37kHzや7.5kHzといった周波数は、マッサージ療法の効果と同様に、収縮した筋原線維の弛緩を促します。施術後、硬くなった部分が溶けるような感覚や柔軟性の向上を実感される方が多くいらっしゃいます。

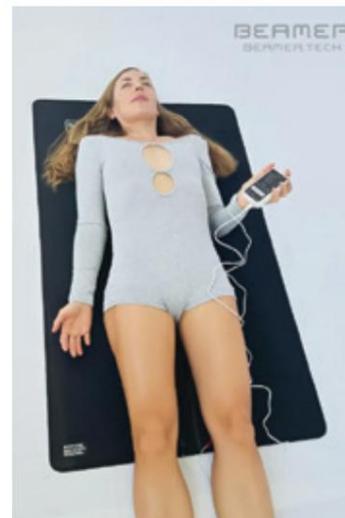

マットの広いカバー範囲は、直接的な痛みの箇所（例：肩こり）と二次的な緊張部位（例：筋肉の緊張による腰痛）の両方に効果を発揮します。長時間のセッションで効果的な電磁場伝達を確保するため、軽めの服装をお勧めします。

プログラム4の有効性は臨床データによって裏付けられており、繰り返し使用することで最大50%の痛みの軽減が示されています。持続的な効果を得るには、週に5回以上のセッションを推奨します。水分補給と穏やかな運動を組み合わせることで、治療した組織の解毒と修復を促進します。

腰痛（プログラム#5）

ビーマーPEMFマット – プログラム5（腰痛緩和）

プログラム5は、10種類の特殊な周波数（0.14～932kHz）を10分間隔でパルス状に照射し、腰痛の複数の原因にアプローチするように設計されています。最適な効果を得るには、90分から120分のセッションを推奨します。このプログラムは、炎症、筋肉の緊張、神経の刺激、変性変化といった、急性および慢性の腰痛に共通する原因に対処します。



低周波（0.14～7.5kHz）は、脊柱起立筋やQLなどの深層筋の緊張を緩和します。これらの筋肉の緊張は、姿勢痛や機械的疼痛の原因となることがよくあります。中周波（55～96.6kHz）は、椎間板、靭帯、および周囲の結合組織の修復を促進します。高周波（376.29～932kHz）は脊髄神経をターゲットにし、痛みの信号伝達を抑制し、神経バランスを促進します。

神経関連の腰痛には、425.09kHzや571kHzなどの周波数が、神経膜の活動亢進を鎮静させ、痛みに関連する神経伝達物質であるサブスタンスPのレベルを低下させるのに役立ちます。833kHzの周波数は、腰椎圧迫による放散痛の軽減に効果が期待されており、932kHzは脊椎傍領域の筋痙攣サイクルを断ち切るのに役立つ可能性があります。



椎間関節の変形性関節症などの構造的疼痛にも、96.6kHzなどの周波数が効果的です。この周波数は軟骨の破壊を遅らせ、関節液の産生を促進する可能性があります。線維芽細胞の活動は55kHzと376.29kHzによってサポートされ、軟部組織の修復を促進します。

ビーマーマットは全身にフィットするレイアウトで、腰部や胸部などの特定の部位をマッサージしながら、代償性緊張や全身性炎症にも対処できます。施術中は軽装をお勧めします。

臨床研究によると、継続的な使用により、痛みのスコアが40～60%減少し、可動性が向上し、薬物への依存度が軽減されることが示唆されています。最良の結果を得るには、姿勢ケアと軽い運動を組み合わせた週4～5回のセッションをお勧めします。


高度な治療

Beamer-Tech PEMF システムと RDPV4 の互換性

Beamer-Tech PEMFシステムは、パルス電磁場（PEMF）療法を用いた回復、循環、そして痛みの緩和のための包括的なソリューションを提供します。マットは単独で使用することも、Rife Digital Professional V4（RDPV4）と組み合わせて使用することで、周波数ベースの効果を高めることもできます。

RDPV4による周波数アプリケーションの拡張

RDPV4の重要な特徴は、ターゲットを絞った健康状態のための正確な周波数伝送です。Beamer-Tech Matと組み合わせることで、ユーザーは幅広いプリセットプログラムにアクセスし、最適なセラピーセッションを行えます。

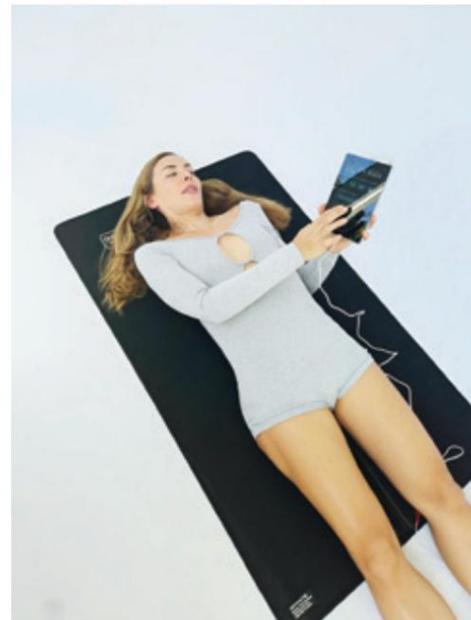

マットおよび RDPV4 を組み合わせることで、ターゲットを絞った PEMF パルスが実現し、次のことがサポートされます。

- 循環と組織の酸素供給が促進されます。
- 炎症と筋肉の緊張が軽減されます。
- 深いリラクゼーションとストレス解消。
- 筋肉や関節の緊張からの回復。

RDPV4 のデュアル出力により、ユーザーは全身 PEMF 療法を受けながら特定の領域をターゲットにすることができ、治療の柔軟性が向上します。

高度なビーマーテックコントローラー


Beamer-Tech コントローラーには以下が含まれます。

- リラクゼーション、回復、循環のための 5 つのプリセット PEMF プログラム。
- 個人に合わせた低/高強度オプション
快適。
- 30、60、90、または 120 分のタイマー設定。
- 安定した PEMF 伝送のための安全なポート。



非侵襲性、薬物不使用のウェルネスソリューション

Beamer-Tech システムは、PEMF と RDPV4 周波数を組み合わせることで、強力にカスタマイズ可能な非侵襲性の治療を実現し、家庭とプロのウェルネスの両方に最適です。

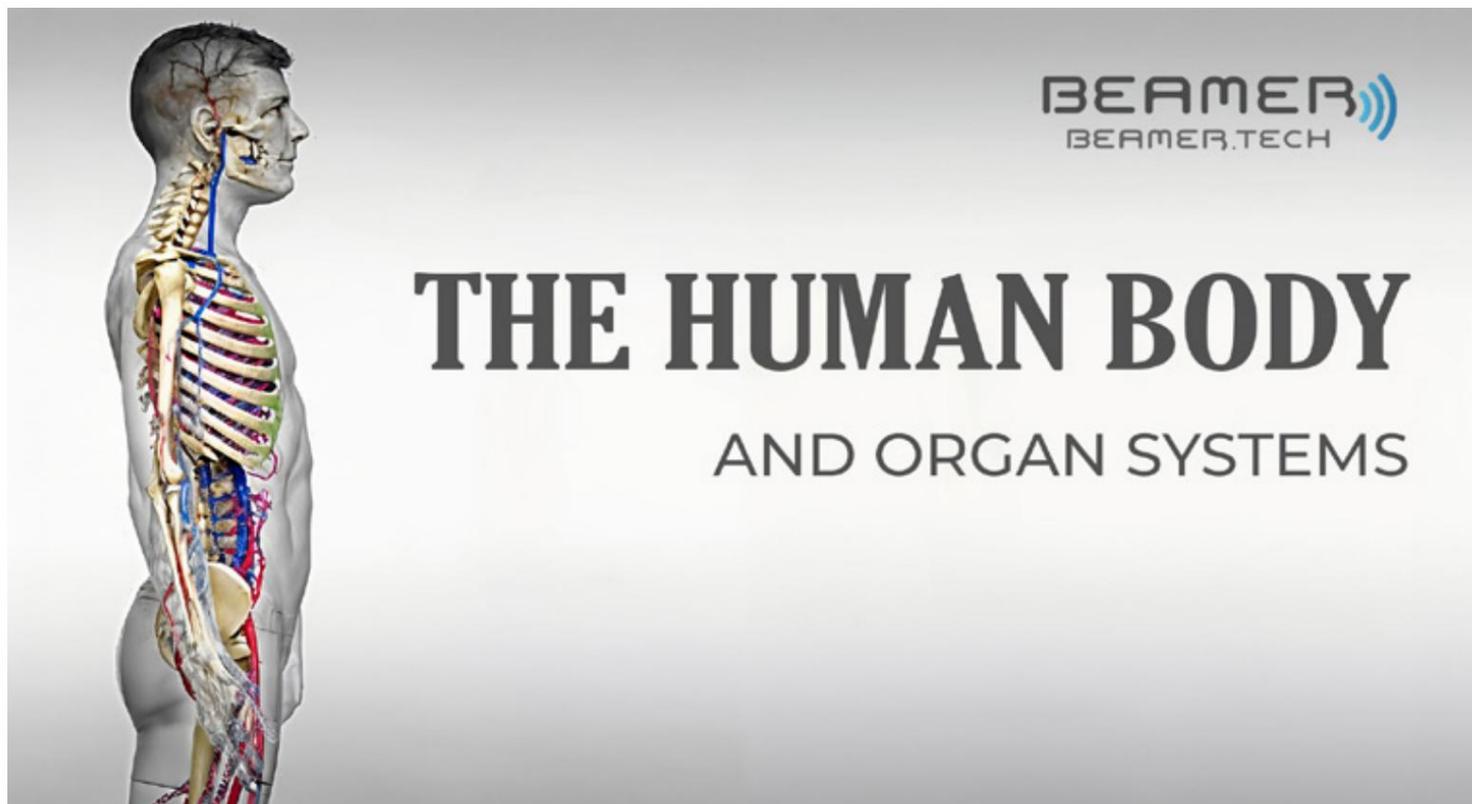

私たちの体は、すべての重要な身体機能を担う11の器官系で構成されています。それぞれの器官系は相互に依存していますが、調和が崩れることがあります。一つの器官系が正常に機能していないと、他の器官系がその問題を修正しようとします。すべての器官系が協力して、体内のバランスを保とうとします。

11の器官系には、外皮系、骨格系、筋肉系、リンパ系、呼吸器系、消化器系、神経系、内分泌系、心血管系、泌尿器系、生殖器系が含まれます。

Beamer PEMFテクノロジーは、大型マットを通して伝達されるパルス周波数を用いて、人体の臓器系のバランスを整える全身療法です。PEMF療法は60年以上にわたり効果的に使用され、体内の恒常性とバランス状態を達成するための主要な治療法であり続けています。

次の章では、ビーマーパルス周波数技術が人体と臓器系にどのように役立つかを説明します。

条件



1. 外皮系（皮膚、髪、爪）



2. 骨格系（骨、関節）



3. 筋肉系（心筋、平滑筋、骨格筋）



4. リンパ系と免疫系



5. 呼吸器系（肺、気道）



6. 消化器系（胃、肝臓、腸）




7. 神経系（脳、脊髄、神経）



8. 内分泌系（ホルモンバランス）



9. 心臓血管（循環器）システム（心臓、血管）

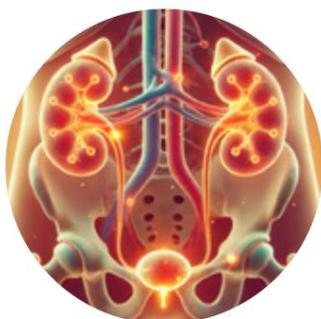

10. 泌尿器系（腎臓、膀胱、尿道）




11. 生殖器系（男性と女性の健康）



12. その他のカテゴリー

INTEGUMENTARY SYSTEM

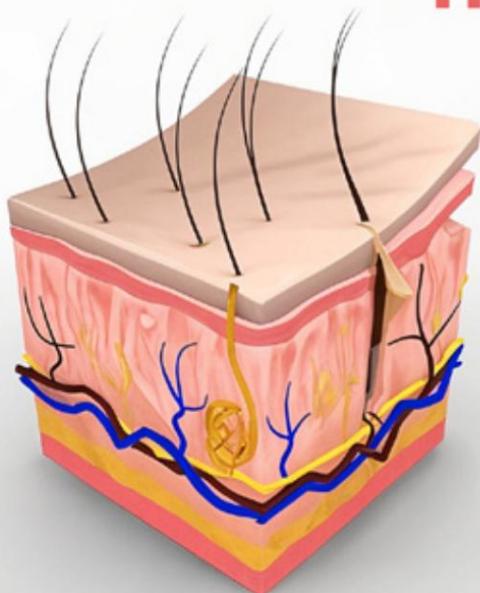

Equaling 15-20% of our total body mass, this system includes the **skin, hair, and nails.**

外皮系（皮膚、髪、爪）

外皮系は体最大の器官であり、体重の15～20%を占めます。物理的、化学的、生物学的な脅威に対する防御バリアとして機能します。皮膚は発汗と体温を調節するだけでなく、触覚、痛み、快感といった感覚を伝達します。毛は頭皮温度を調節し、フェロモンを分泌します。爪は指先を保護し、自己防衛、食物の収集、感覚刺激といった動作に不可欠です。

皮膚が傷つくと、感染しやすくなります。

ビーマーPEMFターゲット

Beamer PEMFは、ニキビ、塩素座瘡、皮膚炎、湿疹、じんましん、狼瘡、乾癬、自己免疫疾患、角質や毛穴の問題、そして黒色腫や基底細胞がんなどの皮膚がんなど、様々な皮膚疾患に効果があります。Beamerマットは、パルス電磁周波数を用いて全身の治癒を促進します。

推奨される治療方法

皮膚疾患には、夜間治療が最も効果的です。日中の使用も効果的です。リクライニングチェア、ソファ、またはベッドにマットを置くだけで使用できます。マットの上に直接横になることも、シーツを敷くこともできます。赤と黒のケーブルをマットの足元付近に接続し、セットアップガイドに従ってコントローラーまたはRifeデバイスに接続してください。

SKELETAL SYSTEM

The skeletal system, containing bones and joints, supports and protects the body's internal organs.



骨格系（骨、関節）

骨格系は重要な臓器を保護し、体の構造を支えます。肋骨は腹部の臓器を保護し、頭蓋骨はすべての身体機能を制御する脳を保護します。骨は形を整え、筋肉の付着部を通して動きを支え、カルシウムなどのミネラルを貯蔵し、血液細胞を生成します。


骨髄。

ビーマーPEMFターゲット

Beamer PEMFは、関節炎、癌、脊柱側弯症、骨粗鬆症、痛風、滑液包炎、骨折、切断などの骨格系の症状に効果があります。パルス電磁周波数を通じて、全身の治癒と骨の健康をサポートします。

推奨される治療方法

骨格の問題には、夜間の使用をお勧めします。日中のセッションでは、マットをリクライニングチェア、ソファ、またはベッドに置いてください。マットの上に直接横になることも、シーツを敷くこともできます。赤と黒のケーブルをマットのベース（足元付近）に接続し、セットアップガイドに従ってコントローラーまたはRifeマシンに接続してください。このセットアップにより、骨と関節の回復のための継続的な治療が促進されます。

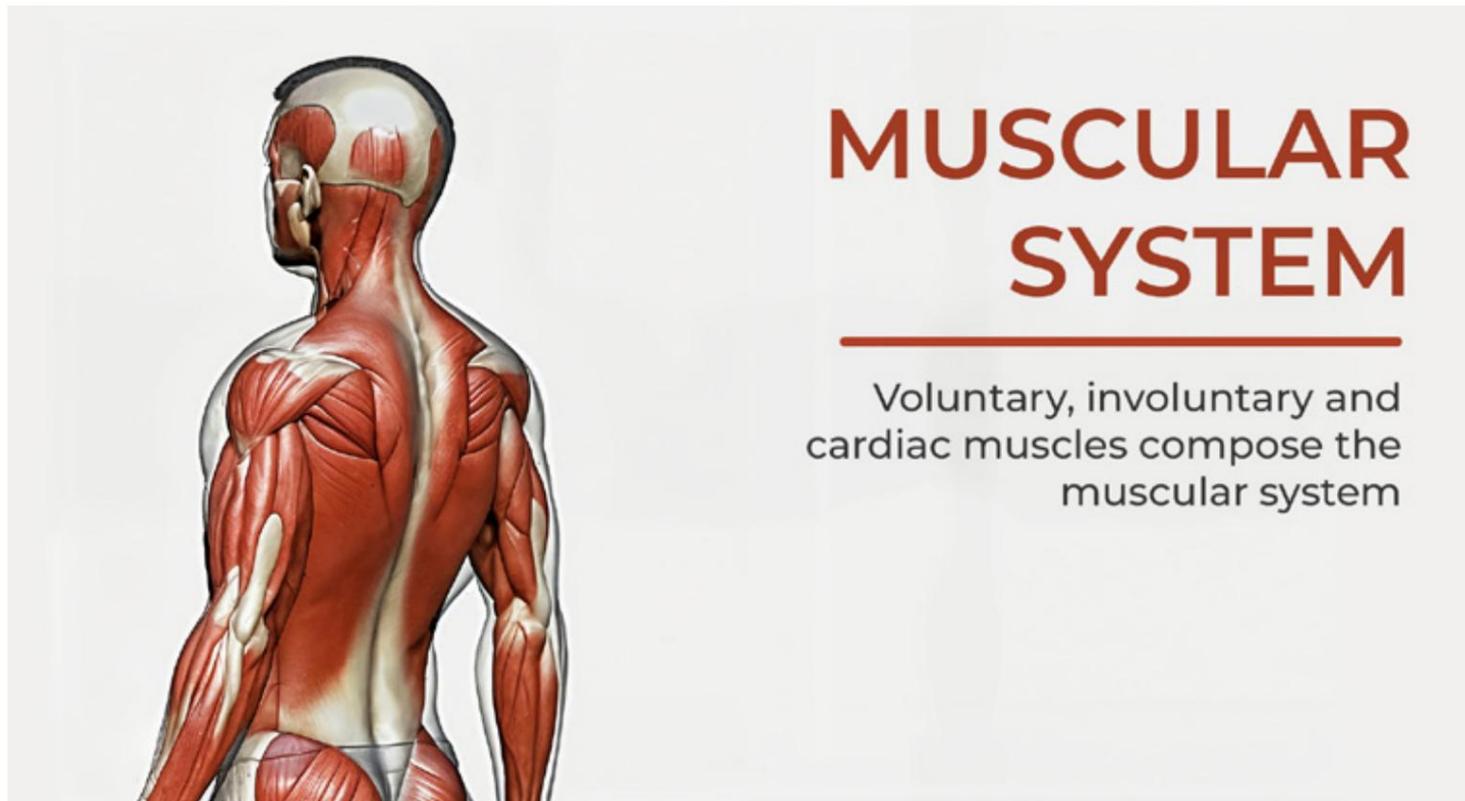

MUSCULAR SYSTEM

Voluntary, involuntary and cardiac muscles compose the muscular system

筋肉系（心筋、平滑筋、骨格筋）

心臓にある心筋は、体全体に血液の流れを促進します。

平滑筋（不随意筋）は臓器の内側を覆い、消化などの内部運動を制御します。

骨格筋（随意筋）は、神経系を介して脳からの信号に反応し、運動、姿勢の維持、体温の産生を可能にします。酸素不足は筋肉のけいれんや断裂を引き起こし、また、筋肉を使わないと萎縮につながる可能性があります。

ビーマーPEMFターゲット

Beamer PEMFは、筋ジストロフィー、線維筋痛症、腱炎、多発性硬化症、肉離れ、捻挫、ヘルニアなどの症状にアプローチし、筋肉の健康をサポートします。パルス電磁周波数は、筋肉の機能と回復を改善することで、全身の治癒を促進します。

推奨される治療方法

筋肉の不調には、夜間のセッションが最適です。日中は、Beamerマットをベッド、リクライニングチェア、ソファ、またはラウンジに置いてご使用ください。マットの上にシーツを敷くことも、直接マットの上に横になることもできます。マットの足元付近にある赤と黒のケーブルを接続し、セットアップガイドに従ってコントローラーまたはRifeマシンと接続してください。このセットアップにより、心筋、平滑筋、骨格筋を効果的に、かつ集中的にサポートできます。

LYMPHATIC SYSTEM

Red bone marrow, thymus, lymphatic vessels, thoracic duct, spleen, and lymph nodes make up this system responsible for fluid transport.



リンパ系（骨髄、胸腺、リンパ管、胸管、脾臓、リンパ節）

リンパ系は、きれいな体液を血流に戻し、組織から余分な体液や老廃物を排出することで、体液バランスを維持する役割を果たします。また、リンパ球（白血球）を収容し、感染から体を守ることで、免疫機能においても重要な役割を果たします。

ビーマーPEMFターゲット

Beamer PEMFは、貧血、白血病、リンパ節結核、ホジキン病、その他の血液関連疾患といった症状をターゲットに、リンパ系の健康をサポートします。全身マットを通してパルス電磁周波数を用いることで、この技術は体全体の治癒とバランスを促進します。

推奨される治療方法

夜間のセッションは、リンパ関連の症状に最適です。日中のトリートメントの場合は、マットをリクライニングチェア、ベッド、またはソファに置いてください。マットの上に直接横になることも、シーツを敷くこともできます。マットの底部（足元付近）にある赤と黒のコネクタを取り付け、セットアップ手順に従ってコントローラーまたはRifeマシンに接続してください。この方法は、リンパ系の浄化機能と免疫機能を持続的かつ非侵襲的にサポートします。

RESPIRATORY SYSTEM

Consisting of the nasal cavity, pharynx, larynx, trachea, bronchus, and lungs with the purpose of maintaining our breathing.

呼吸器系（鼻腔、咽頭、喉頭、気管、気管支、肺）

呼吸器系は、細胞のエネルギー源となる酸素を肺に送り込み、老廃物である二酸化炭素を排出することで呼吸を可能にしています。また、発声や嗅覚もサポートしています。

ビーマーPEMFターゲット


Beamer PEMFは、アレルギー、鼻炎、副鼻腔炎、喉頭炎、COPD、胸膜炎、気管支炎、肺気腫、喘息、サルコイドーシス、線維症、アスベスト症、肺血管疾患、肺感染症、睡眠時無呼吸症候群、結核、肺がんや咽頭がんなど、様々な呼吸器疾患に効果があります。Beamerマットは、パルス電磁場を用いて全身周波数療法を行い、体のバランスを整え、治癒を促進します。

推奨される治療方法

呼吸器系の問題がある場合は、夜間のセッションをお勧めします。日中は、Beamerマットをベッド、リクライニングチェア、またはソファに置いてください。マットの上に直接横になることも、シーツを敷いて横になることもできます。赤と黒のケーブルをマットのベース（足元付近）に接続し、セットアップガイドに従ってコントローラーまたはRifeマシンに接続してください。このセットアップは、呼吸器系の健康をサポートする、穏やかで非侵襲的なアプローチです。

DIGESTIVE SYSTEM

For absorption of nutrients, the digestive system includes the oral cavity, esophagus, liver, stomach, small intestine, large intestine, rectum, and anus.

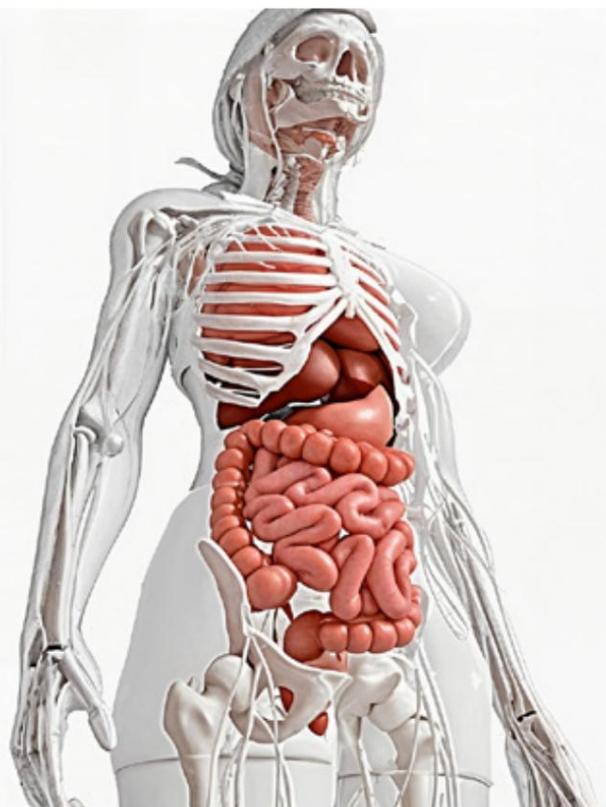

消化器系（口腔、食道、肝臓、胃、小腸、大腸、直腸、肛門）

消化器系は口から始まり、食べ物を分解し、栄養素を吸収し、老廃物を排出する役割を担っています。体内で利用できるビタミン、ミネラル、栄養素を決定し、残りを排出します。


ビーマーPEMFターゲット

Beamer PEMFは、憩室炎、胃炎、膵炎、胆嚢炎、肝硬変、肝炎、肝臓がん、過敏性腸症候群（IBS）、クローン病、痔核などの症状に働きかけ、消化器系の健康をサポートします。パルス電磁周波数は、消化管全体のバランスを回復し、治癒を促進します。

推奨される治療方法

消化器系の問題には、夜間療法が推奨されます。日中のセッションでは、マットをベッド、リクライニングチェア、またはソファに置いてください。マットの上に直接横になることも、シーツを敷いて横になることもできます。マットの底にある赤と黒のコネクターを取り付けてください。

（足元付近）に設置し、セットアップガイドに従ってコントローラーまたはRifeマシンに接続します。このセットアップは、PEMFによる全身への優しい刺激で、消化器系の機能をサポートします。

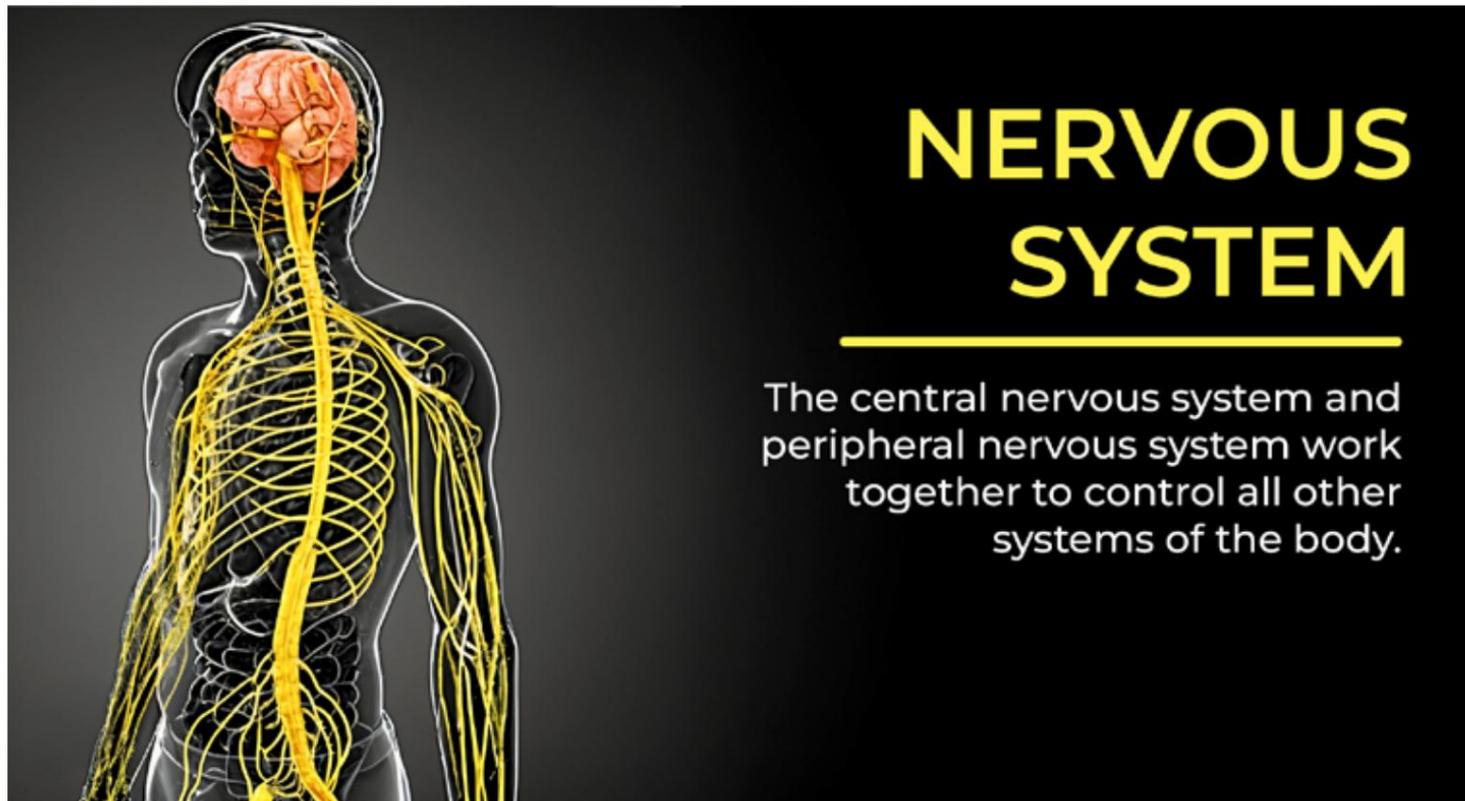

NERVOUS SYSTEM

The central nervous system and peripheral nervous system work together to control all other systems of the body.

神経系（脳、脊髄、神経）

神経系は、脳と脊髄からなる中枢神経系（CNS）と、中枢神経系と体の他の部位をつなぐ神経を含む末梢神経系で構成されています。末梢神経系は、消化や心拍を含む他のすべての身体系を制御し、内的小および外的刺激に反応して、痛みや触覚などの感覚を伝えます。

ビーマーPEMFターゲット

Beamer PEMFは、麻痺、パーキンソン病、塞栓症、血栓症、動脈硬化症、ポリオ、筋萎縮性側索硬化症（ALS）、髄膜炎、多発性硬化症、筋チック、ハンチントン病、脳腫瘍または脊髄腫瘍、てんかん、発作、ナルコレプシー、片頭痛、神経障害、外傷性脳損傷など、幅広い神経系の疾患を対象としています。Beamer PEMFは、パルス電磁場を用いて、神経系のバランスを整え、治癒を促進します。

推奨される治療方法

神経系の問題がある場合は、夜間の使用をお勧めします。日中のセッションでは、マットをベッド、リクライニングチェア、またはソファの上に敷いてください。シーツを敷いても、マットの上に直接横になっても構いません。マットの足元付近にある赤と黒のケーブルを接続し、セットアップガイドに従ってコントローラーまたはRifeマシンに接続してください。このアプローチは、非侵襲的で全身の神経系をサポートします。

ENDOCRINE SYSTEM

Responsible for releasing hormones, this system includes the pineal gland, pituitary gland, thyroid, thymus, adrenal gland, pancreas, ovary, and testis.



内分泌系（松果体、下垂体、甲状腺、胸腺、副腎、膵臓、卵巣、精巣）

内分泌系は、成長、生殖、代謝、血糖値を制御するホルモンを放出することで、重要な身体機能を調節します。


ビーマーPEMFターゲット

Beamer PEMFは、1型および2型糖尿病、低血糖、アジソン病、クッシング症候群、甲状腺機能亢進症および低下症、甲状腺がん、その他の内分泌腺がんといった疾患をターゲットにすることで、内分泌腺の健康をサポートします。マットを通して伝達されるパルス電磁周波数は、ホルモン調節器官全体のバランスを回復するのに役立ちます。

推奨される治療方法

内分泌系の症状には、夜間のセッションが最適です。日中の治療には、マットをベッド、リクライニングチェア、またはソファに置いてください。マットの上に直接横になることも、シーツを使うこともできます。ベース付近の赤と黒のコネクタを接続してください。

（マットの足元）に設置し、セットアップガイドに従ってコントローラーまたはRifeマシンに接続します。この方法は、安全かつ非侵襲的に、内分泌バランスとホルモンバランスの健康をサポートします。

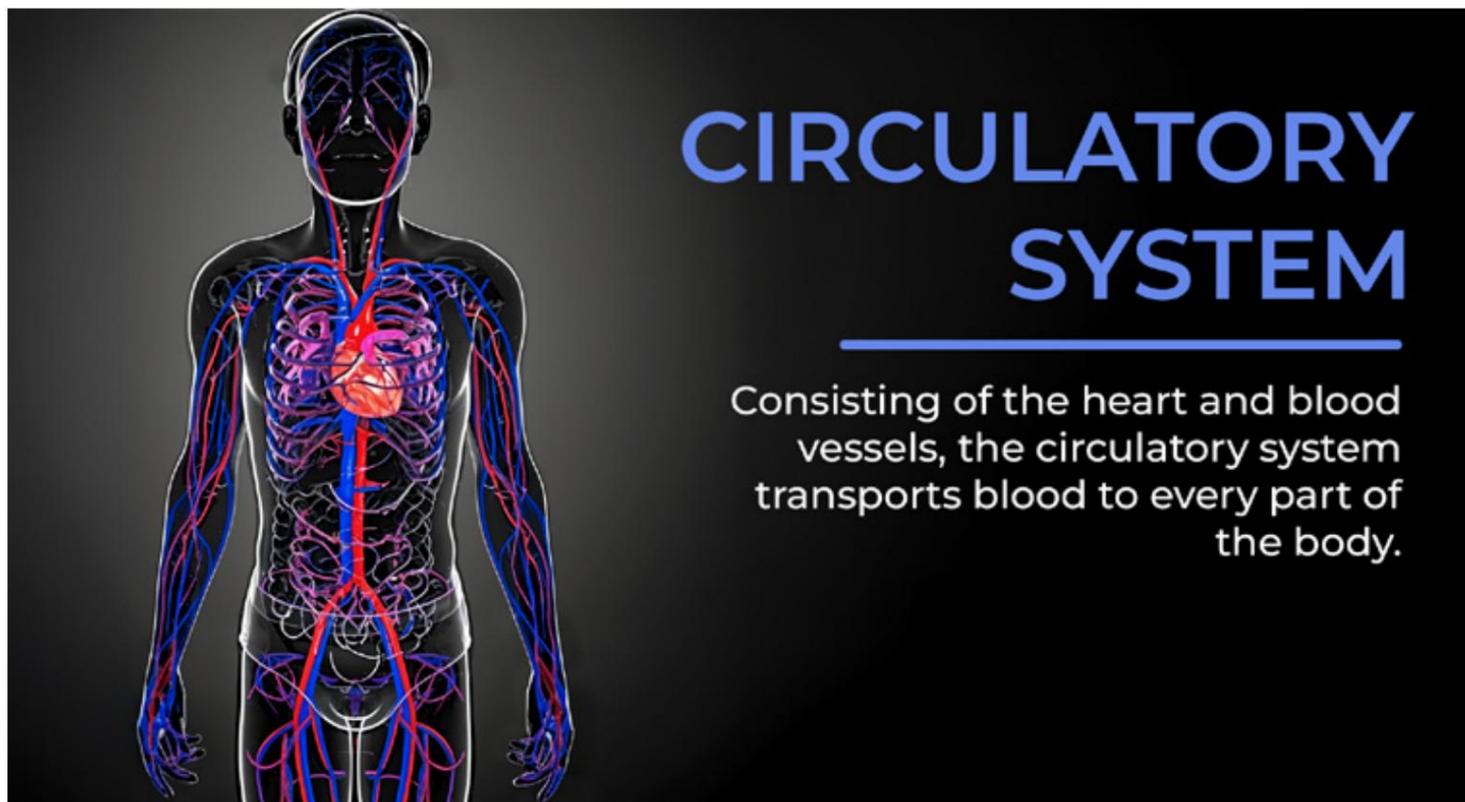

CIRCULATORY SYSTEM

Consisting of the heart and blood vessels, the circulatory system transports blood to every part of the body.

心血管系（循環器系）（心臓、血管）

心血管系は血液を全身に循環させます。心臓は血液を送り出し、動脈と静脈は酸素、二酸化炭素、栄養素、老廃物を運び、臓器や筋肉に栄養を届けます。

ビーマーPEMFターゲット

Beamer PEMFは、心筋梗塞、不整脈、弁膜症、ペースメーカー関連疾患、移植、虚血性心疾患および高血圧性心疾患、動脈硬化症、動脈瘤、瘻孔、アナフィラキシーショック、静脈瘤、寒冷障害、肉腫などの血管がんなどの症状をターゲットにすることで、循環器系の健康をサポートします。マットから発せられるパルス電磁周波数は、血管のバランスと機能を回復するのに役立ちます。


推奨される治療方法

夜間のセッションは、心臓血管系の問題に最適です。日中は、リクライニングチェア、ソファ、またはベッドの上にマットを敷いてご使用ください。マットの上に直接横になることも、シーツを敷いて横になることもできます。

赤と黒のケーブルをマットの足元にあるコネクタに接続し、セットアップ手順に従ってコントローラーまたはRifeマシンに接続します。このセットアップにより、全身の非侵襲的な循環サポートが得られます。

URINARY SYSTEM

Responsible for eliminating waste, this system includes the kidneys, ureter, urinary bladder, and urethra.

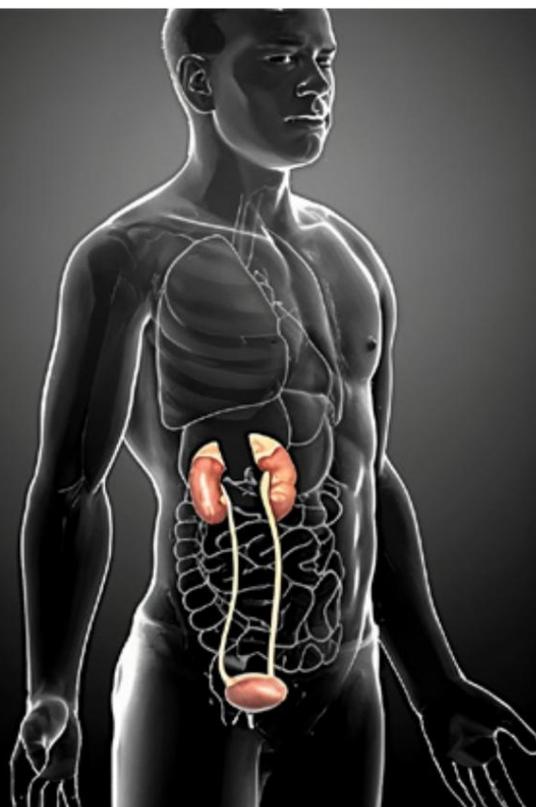

泌尿器系（腎臓、尿管、膀胱、尿道）

尿路は、代謝老廃物や余分な物質を体外に排出する役割を担っています。体液量を調節し、電解質のバランスを保ち、血液のpH値を適切に保つなど、全身の解毒と体内のバランスを保つ上で重要な機能を果たします。

ビーマーPEMFターゲット


Beamer PEMFは、ネフローゼ、膀胱がん、尿道炎、夜尿症、腎結石・尿路結石、感染症、腎不全、失禁、血尿、間質性膀胱炎など、幅広い泌尿器系の症状に効果があります。パルス電磁周波数を用いて、このマットは尿路機能の治癒とバランス調整をサポートします。

推奨される治療方法

尿路疾患の治療には、夜間の施術が強く推奨されます。深く途切れることのない治療効果が得られるからです。日中の施術も効果的です。マットをリクライニングチェア、ベッド、またはソファに置いてください。マットの上に直接横になることも、シーツを敷いて使用することもできます。マットの足元付近にある赤と黒のケーブルを接続し、セットアップ手順に従ってコントローラーまたはRifeマシンに接続してください。この全身PEMFアプローチは、尿路の健康と老廃物の排出をサポートする、非侵襲的で便利な方法です。

REPRODUCTIVE SYSTEMS

This system is responsible for creating human life, and has varied organs between men and women.

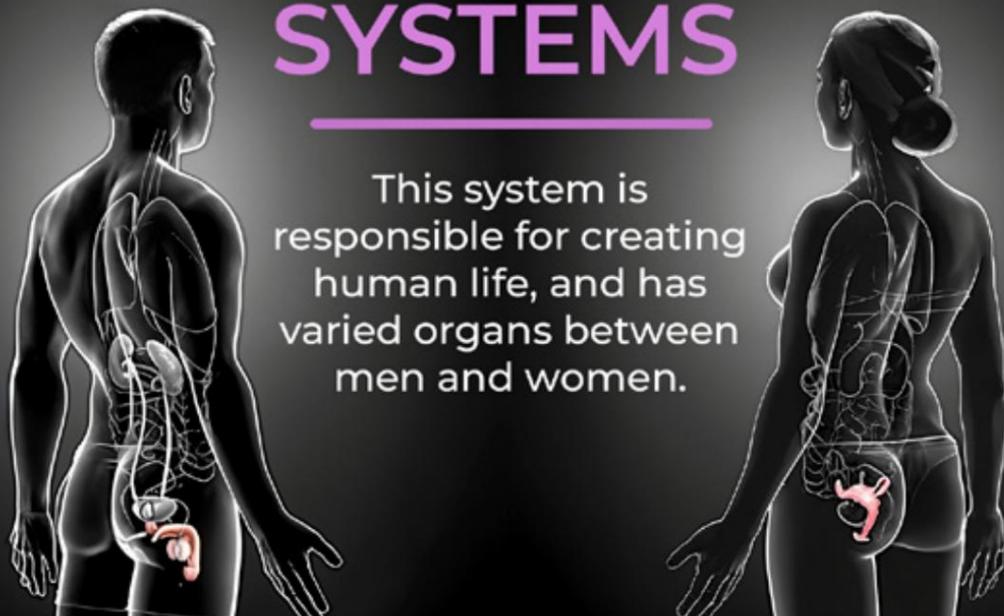

生殖器系

生殖器系は、生殖に関わる器官から構成されています。男性の場合：精巣、陰茎、精囊、前立腺、尿道。女性の場合：卵巣、卵管、子宮、膣、外陰部。これらの器官系は、生殖能力、ホルモン産生、そして生殖の健康に重要な役割を果たします。

ビーマーPEMFターゲット

Beamer PEMF は、乳がん、乳房切除術または乳腺腫瘍摘出術後の回復、子宮摘出、子宮内膜症、妊娠合併症、卵巣、子宮頸部、子宮、外陰部のがんや損傷など、女性の症状を対象として生殖に関する健康をサポートします。

男性の場合、前立腺がん、精巣がん、前立腺肥大症（BPH）、前立腺炎、不妊症、テストステロン欠乏症に効果があります。ビーマーマットは、パルス電磁周波数を用いて生殖器系のバランスを回復し、治癒を促進します。

推奨される治療方法

夜間治療は、持続的なサポートを提供し、生殖機能の症状に最適です。日中のセッションでは、マットをリクライニングチェア、ベッド、またはソファに置いてください。マットの上に直接横になるか、シーツを敷いてご使用ください。マットの底面（足元）にある赤と黒のケーブルを接続し、セットアップガイドに従ってコントローラーまたはRifeマシンに接続してください。この全身PEMF療法は、生殖機能の健康維持のための、優しく非侵襲的なケアを提供します。

その他のカテゴリー

特殊感覚器官（目）

目は視覚を司り、構造的および神経学的状態に非常に敏感です。ビーマーPEMFは、かすみ目、視野欠損、暗点、筋機能障害、眼内出血、網膜剥離、網膜症、結膜炎、角膜損傷および移植、無水晶体眼症、白内障、緑内障、視神経症、涙腺障害、眼がんまたは関連疾患などの疾患の治療をサポートします。

構造。

聴覚障害（耳）

耳は聴覚とバランスを調節します。BeamerのPEMFは、組織の修復と神経バランスを刺激することで、難聴、耳鳴り、慢性的な耳の感染症、バランス障害、耳関連の癌などの症状を改善する可能性があります。

精神障害（心理的問題）

Beamer PEMFは、脳活動を調整し、不安、PTSD、強迫性障害、パニック発作、適応障害、双極性障害、うつ病、統合失調症、神経認知障害、摂食障害、恐怖症などの精神疾患の回復をサポートする可能性があります。2014年以前の精神状態評価を受けている場合は、VSOまたは弁護士にご相談の上、分類と給付金の改訂についてご確認ください。

感染症、免疫疾患、栄養不足

ビーマーPEMFは、マラリア、コレラ、塹壕熱、ハンセン病、梅毒、HIV、COVID/SARS、狼瘡、ライム病、腸チフス、結核（非呼吸器系）、慢性疲労症候群などの疾患を対象としています。免疫反応の調節と細胞治療のサポートに役立つ可能性があります。

Rife Digitalでの使用

Beamer PEMFは、Rife Digital Professionalシリーズと組み合わせることで、より具体的な周波数ターゲット設定が可能です。ETDFL.comのETDFL周波数マニュアルを参照して適切なプログラムを選択し、Beamer Matで実行することで、より高い効果が得られます。

FAQよくある質問

■ Beamer-Tech PEMF マットを使用する場合、Rife Professional V4 のどの設定を使用すればよいですか？

Beamer-Tech PEMFマットをRife Professional V4と併用する際は、ご自身の健康目標に合ったプリセット周波数プログラムを選択することをお勧めします。Rife Professional V4には、痛みの緩和、血行促進、筋肉の回復、リラクゼーションをサポートするように設計された複数の周波数セットが含まれています。ご自身の目標に合った周波数プログラムがない場合は、ETDFLブック（ETDFL.COMから無料でダウンロード可能）を参照して、ご自身の健康目標に基づいた周波数の推奨事項をご確認ください。

■ Beamer アクセサリと一緒に使用する最新の V4 Rife マシンはどこで購入できますか？

3,500のグループとコントローラの高度な機能にアクセスするには、Beamer.TechショッピングカートからRife Professional V4を購入できます。

ビーマーテックPEMFマットを使用すると敏感になります

Beamer-Tech PEMFマットの使用中に過敏症を感じた場合は、コントローラの強度設定を「低」から始めることをお勧めします。マットが平らな面に快適に設置され、体に過度の圧力がかからないことを確認してください。

不快感が続く場合は、コントローラを低強度に設定し、体が徐々に治療に慣れるのを待ちましょう。マットは、締め付け感がなく、優しく均一に覆うようにすることで、リラックスして効果的なPEMF療法セッションを実現します。

■ Beamer-Tech PEMFマットがうまくフィットしません。助けてください！

Beamer-Tech PEMFマットは全身をカバーするように設計されており、最適な使用のためには平らで快適な表面に置いてください。ウェアラブルデバイスとは異なり、PEMFマットは効果を発揮するために肌に直接接触する必要はありません。

最良の結果を得るには:

- 全身を照射できるように、マットをベッド、リクライニングチェア、または治療台の上に平らに置きます。
- マットの上で楽な姿勢をとり、PEMF療法が均等に分散されるようにしてください。
- 必要に応じて、PEMFを妨げずに快適性を高めるために薄い綿のシーツを使用してください。
伝染; 感染。

* PEMF 波は自然に身体に浸透するため、ストラップや調整は不要で、きつくフィットさせる必要がなく効果的な治療を提供します。

■ Beamer-Tech PEMF マットは犬、猫、その他の動物に使用できますか？

はい、ビーマーテックPEMFマットは、犬、猫、その他の動物のリラクゼーション、血行促進、回復をサポートするために安全に使用できます。多くの飼い主様が、関節の不快感、運動機能の低下、あるいは一般的な健康維持のためにPEMF療法を使用しています。

ただし、ペットがマットやケーブルを噛んだり引っ張ったりして機器を損傷する可能性があることにご注意ください。Beamer-TechのPEMFシステムは安全な低電圧で動作するため、万が一ペットが接触した場合でも害はありません。

* 重要事項 : ペットによるマットまたはコントローラの物理的な損傷（噛みつき、引き裂きなど）は保証の対象外となります。損傷を防ぐため、使用中はペットの様子を確認し、使用していないときはケーブルをペットの手の届かない場所に保管してください。

■ Beamer-Tech コントローラーは実際にどのように動作するのでしょうか？

Beamer-Tech コントローラーは、パルス電磁場 (PEMF) 周波数を正確に生成して Beamer-Tech PEMF マットに送信するように設計されており、循環、痛みの緩和、回復サポートのためのターゲット治療を提供します。

光ベースのデバイスとは異なり、Beamer-Tech コントローラーは次のように動作します。

- 科学的に調整されたPEMF信号を発生させ、体内の自然な生体電気システム。
- マットを通してパルス電磁波を送り、細胞機能と循環を強化します。
- 個人の健康ニーズに合わせて調整可能な強度レベルと複数のプリセット周波数プログラムを提供します。

Beamer-Tech システムは、PEMF 出力を最適化することで、非侵襲的かつ自然な方法で筋肉の弛緩、炎症の軽減、全体的な健康をサポートします。

保証と免責事項

保証

- DOA保証: Beamer™が輸送/宅配便による損傷を伴って到着した場合、直ちに交換いたします。
- 3ヶ月交換保証 :Beamer™が通常の使用で故障した場合、90日以内に交換いたします。新しい商品をお客様のご住所までご返送いただく際の送料は、お客様負担となります。
- 衛生上の理由により、Beamer™マットおよびコントローラーは当社のサービスセンターでは修理できません。保証期間内に必ず新しい製品をご提供いたします。

免責事項

- Beamer™は、BEAMER™マットおよびコントローラーデバイスが特定の疾患を治癒することを保証するものではありません。Beamer™テクノロジーは、EUにおいて3年以上にわたり研究者によってテストされており、Rifeデジタルシリーズと併用することでのみ良好な結果が得られています。Beamer™は他社製のRifeマシンとの併用テストは実施されていないため、機器を他の用途に改造した場合の保証はありません。Beamer™マット自体はゴム製の導電性導管であり、機器に接続されていない状態ではいかなる処理も実行しません。

ETDFLについて



ETDFL.com



ETDFLとBeamer-Techによる周波数ベース療法について

ETDFL（電気治療装置周波数リスト）は、世界12のクリニックが主導する国際的な取り組みで、Quantum SCIOバイオレゾナンス技術を用いて高精度の周波数セットを収集・改良しています。2006年にCAFLリストに代わるものとして初めて導入されたETDFLは、以来10万人以上のRifeマシンユーザーの標準となっています。

世界中で。

ETDFLの各周波数セットは、実際の臨床データに基づいて慎重に開発されており、それぞれの症状に最も効果的な10の周波数が含まれています。これらは、Rife Digital Professional V4（RDPV4）などの機器と併用できるように設計されており、Beamer-Tech PEMF Matなどの互換性のあるPEMFシステムに送信できるため、回復を促進し、炎症を軽減し、血行を改善する安全で非侵襲的なオプションを提供します。

Beamer-Tech PEMFシステムはRDPV4とシームレスに連携するように設計されており、ユーザーはETDFLが提供する幅広い周波数セットの恩恵を受けることができます。この統合により、リラクゼーション、筋肉の回復、痛みの緩和、細胞全体のバランスなど、特定の健康目標の達成をサポートします。

ETDFL リストは毎年更新され、最新の検索可能な PDF 版はETDFL.comで無料で入手できます。

印刷物に記載されていない最新の周波数プログラムやより広範な健康アプリケーションについては、以下のデジタルデータベースをご覧ください。

ETDFL.com。

パルス電気周波数 磁場マット



ビーマー

PEMF

BEAMER 
BEAMER.TECH

Beamer-Tech Store は、最先端の PEMF テクノロジーを活用して回復をサポートし、循環を高め、全体的な健康を促進する、高度な健康ソリューションに重点を置いています。

お問い合わせ

 www.beamer.tech

 206-708-6408

 etdfl.web@gmail.com

 ビーマーテックソリューションズ

1712 パイオニアアベニュー、シャイアン、ワイオミング州
82001、米国 E 小包&メール
配送オフィス、集荷なし